

Y TẾ TÓC QUỐC TẾ

Danh mục cây tóc và thẩm mỹ y tế



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

Since 2020

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy với mạng lưới dịch vụ rộng khắp trên toàn thế giới

Điện thoại GSM (+90) 539 662 8924 / (+90) 533 894 8843

Mail info@internationalhairmedical.com

ihm@internationalhairmedical.com Địa chỉ web

www.internationalhairmedical.com Địa chỉ : Beylikdüzü /

Istanbul. Pk.34528





Y tế tóc quốc tế

CÔNG TY CHÚNG TÔI

Với tư cách là Blackandgold Medikal Health Group, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm y tế, đặc biệt là cấy tóc và mỹ phẩm da liễu, với Chất lượng / Nhanh chóng và Giá cả phải chăng.

Nhằm mục đích chuyên môn hóa về bán hàng, tiếp thị và dịch vụ kỹ thuật, trên thị trường mà nó có mặt;

Nó đã trở thành công ty được ưa chuộng nhờ độ tin cậy, kinh nghiệm, trình độ hiểu biết kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi.

CHỨNG NHẬN CE / CHỨNG NHẬN EC / BẰNG SÁNG THƯƠNG HIỆU -ISO - TSE CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ CÓ CHỨNG CHỈ CE / CHỨNG NHẬN EC / BẰNG SÁNG THƯƠNG HIỆU -ISO - TSE CHỨNG CHỈ TUÂN THỦ

Tổ chức của chúng tôi; Nó được ủy quyền và phê duyệt để sản xuất và bán Vật liệu cấy ghép tóc và các sản phẩm thẩm mỹ y tế.

Tổ chức của chúng tôi và nhân viên của chúng tôi có giấy chứng nhận ủy quyền bán hàng và thành lập.

Tất cả các sản phẩm chúng tôi bán đều được đăng ký UTS.

Với các tài liệu liên quan và các thông báo cần thiết, tổ chức của chúng tôi hợp tác với hệ thống theo dõi sản phẩm và các hướng dẫn liên quan của Bộ Y tế về sức khỏe cộng đồng và an toàn sản phẩm.

Mỗi sản phẩm bạn mua từ Black and Gold Medikal Health Group đều được kiểm tra chất lượng, có tài liệu phê duyệt và cấp phép, các thông báo cần thiết sẽ được đưa ra và sau đó được cung cấp cho bạn, những người dùng quý giá của chúng tôi, để họ thưởng thức và sử dụng.

100% dụng cụ phẫu thuật y tế chúng tôi sử dụng đều được sản xuất từ thép y tế. Độ chính xác của nó được xác nhận bởi các tài liệu đính kèm của chúng tôi.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Bằng cách phát triển các sản phẩm chất lượng, sáng tạo và khác biệt cho SỨC KHỎE, vốn là bên liên quan quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta, chúng tôi cung cấp cách tiếp cận dịch vụ cho môi trường và xã hội, đặc biệt là cho bạn, những người dùng quý giá của chúng tôi, không có bất kỳ ranh giới nào.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục công việc của mình với tư cách là công ty đáng tin cậy nhất trên thế giới bằng cách không ngừng theo đuổi những đổi mới và công nghệ trong lĩnh vực Cấy tóc và Thẩm mỹ y tế, bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất, thân thiện với môi trường, hướng đến người dùng cho giải pháp của chúng tôi - Định hướng phát triển bền vững.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 13485:2016

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 13485:2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi gerektiren yönetim gereklilikleri için
AQC tarafından onaylanmıştır.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 13485:2016 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014520

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL
www.internationalhairmedical.com

Since 2020



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 9001:2015 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014521

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company



SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

has been verified and recognized as
manufacturer of

**800watt Hair Transplantation Training Set, Graft Shocking Laser Set,
Hair Line Laser, Needle Free Anesthesia Device, Fox Punch Retractor or Straight,
Implantation Forceps, Extraction Forceps, Graft Impactor Pen, Fox Micro Motor,
Hair Analyzer Camera Microscope, Slide Handle, Hair Blade, Hair Transplantation
Chair, Loop Sizer, Sterilizer Forceps, Scissors, Hair Drip Box Set, Operation
Led Lamp, Hair Transplant Dressing Cream Set, Graft Tissue Transfer Barum**

according to the rules of
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and
of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Certificate-no: 014522

The range of validity and details of the inspection can be taken from our
Report no. CP-301023

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary technical
documentation and the conformity declaration as well as the production control guaranteed
by the manufacturer and the provision of the other directive fulfilled if any

First Registration Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Certificate Date : 30.10.2023 Period of Registration : 3 years



Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 45001:2018

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 45001:2018 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 45001:2018 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014518

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan Çevre yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 14001:2015 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014519

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.





Y tế quốc tế

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35095

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NEEDLE FREE ANESTHESIA DEVICE
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 11500

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 11135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 11135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35095

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH/SERRATED OR STRAIGHT
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES
GİRİŞ SINIFI / (CLASS SINIF) : SINIF I (EK 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : Y02 44480

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : EK II + EK III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan, destekleyici bütün belgelerin firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişiminde temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UWIRLANAN STANDARTLAR / UWBIRLANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLANDIĞI) YER / TARIH YERİ, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

Registration Certificate

ZERTIFIKAT - IEF - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTIFIKAT - CERTIFIKAT

ATTESTATIONS OF CONFORMITY certifies that the company

SATURIN MEDICAL

SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

has been verified and recognized as manufacturer of

ISO 13485:2016

Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsama vermiştir. / For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI / PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS

Sertifika No (Certificate No): 014522

30.10.2023

Registration Certificate

ZERTIFIKAT - IEF - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTIFIKAT - CERTIFIKAT

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşu / This certificate has been awarded to the company

SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

Uygulamakta olan yönetim sistemini / To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsama vermiştir. / For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI / PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS

Sertifika No (Certificate No): 014520

30.10.2023

Registration Certificate

ZERTIFIKAT - IEF - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTIFIKAT - CERTIFIKAT

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşu / This certificate has been awarded to the company

SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

Uygulamakta olan Çevre yönetim sistemini / To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsama vermiştir. / For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI / PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS

Sertifika No (Certificate No): 014519

30.10.2023

Registration Certificate

ZERTIFIKAT - IEF - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTIFIKAT - CERTIFIKAT

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşu / This certificate has been awarded to the company

SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

Uygulamakta olan Çevre yönetim sistemini / To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2015

Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsama vermiştir. / For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI / PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS


Sertifika No (Certificate No): 014521

30.10.2023



Y tế tóc quốc tế

ĐƯỢC PUNCH MOTORIZE Cú đấm cơ giới Düz Fue

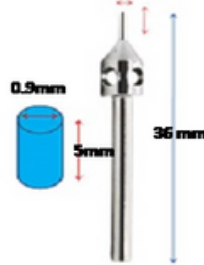

- Thép loại 1 của Đức được sử dụng.
- Có sẵn các phép đo đường kính và chiều dài khác nhau.
- Đã đăng ký với UBB, được Bộ Y tế phê duyệt
- Cung cấp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
- Cấu trúc đầu nhọn đặc biệt mang lại độ nhạy tối thiểu nhất trong mô
- Nó đảm bảo loại bỏ dễ dàng các nang ghép một cách nhẹ nhàng và không gây tổn hại nhấ*



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	D625	D63	D635	D64	D65
0.6-5	D6525	D653	D6535	D654	D655
0.7	D725	D73	D735	D74	D75
0.7,5	D7525	D753	D7535	D754	D755
0.8	D825	D83	D835	D84	D85
0.8,5	D8525	D853	D8535	D854	D855
0.9	D925	D93	D935	D94	D95
0.9,5	D9525	D953	D9535	D954	D955
1	D125	D13	D135	D14	D15
1,1	D1125	D113	D1135	D114	D115
1,2	D1225	D123	D1235	D124	D125
1,3	D1325	D133	D1335	D134	D135



IHM

INTERNATIONAL HAIR MEDICAL



Y tế tóc quốc tế

ĐƯỢC PUNCH MOTORIZE

Cú đâm động cơ nhiên liệu TIRTIKLI / YILDIZ



- Thép loại 1 của Đức được sử dụng.
- Có sẵn 6 mẫu răng cưa và 8 mẫu răng cưa
- Có sẵn răng cưa lá và răng cưa
- Có sẵn các phép đo đường kính và chiều dài khác nhau.
- Đã đăng ký với UBB, được Bộ Y tế phê duyệt
- Cung cấp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
- Cấu trúc đầu nhọn đặc biệt mang lại độ nhạy tối thiểu nhất trong mô
- Nó đảm bảo loại bỏ mô thừa một cách dễ dàng



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	T625	T63	T635	T64	T65
0.6-5	T6525	T653	T6535	T654	T655
0.7	T725	T73	D735	T74	T75
0.7,5	T7525	T753	T7535	T754	T755
0.8	T825	T83	T835	T84	T85
0.8,5	T8525	T853	T8535	T854	T855
0.9	T925	T93	T935	T94	T95
0.9,5	T9525	T953	T9535	T954	T955
1	T125	T13	T135	T14	T15
1,1	T1125	T113	T1135	T114	T115
1,2	T1225	T123	T1235	T124	T125
1,3	T1325	T133	T1335	T134	T135






XS (Cực an toàn) Fue Punch Motorize



- Thép loại 1 của Đức được sử dụng.
- Nó là một mô hình có đầu uốn cong ra ngoài hơn.
- Có sẵn các phép đo đường kính và chiều dài khác nhau.
- Đã đăng ký với UBB, được Bộ Y tế phê duyệt
- Cung cấp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
- Cấu trúc đầu nhọn đặc biệt mang lại độ nhạy tối thiểu nhất trong mô
- Nó đảm bảo loại bỏ dễ dàng các nang ghép một cách nhẹ nhàng và không gây tổn hại nhất.

ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	XS625	XS63	XS635	XS64	XS65
0.6-5	XS6525	XS653	XS6535	XS654	XS655
0.7	XS725	XS73	XS735	XS74	XS75
0.7,5	XS7525	XS753	XS7535	XS754	XS755
0.8	XS825	XS83	XS835	XS84	XS85
0.8,5	XS8525	XS853	XS8535	XS854	XS855
0.9	XS925	XS93	XS935	XS94	XS95
0.9,5	XS9525	XS953	XS9535	XS954	XS955
1	XS125	XS13	XS135	XS14	XS15
1,1	XS1125	XS113	XS1135	XS114	XS115
1,2	XS1225	XS123	XS1235	XS124	XS125
1,3	XS1325	XS133	XS1335	XS134	XS135

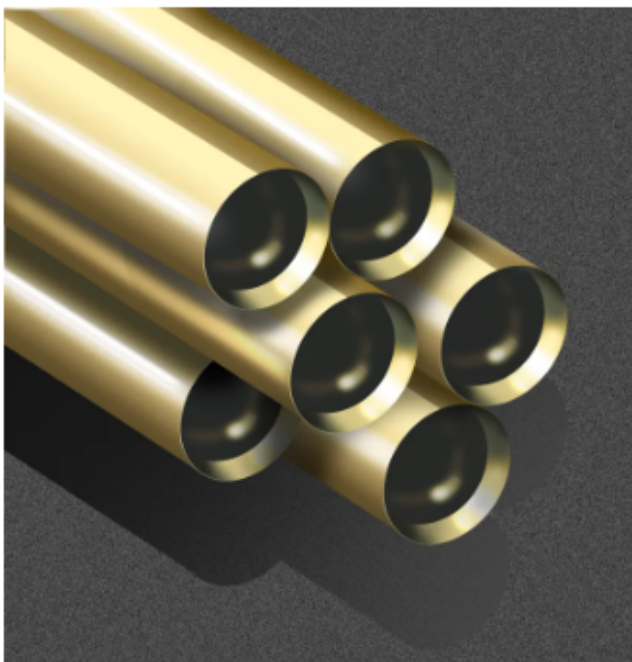



Y tế tóc quốc tế

ĐƯỢC PUNCH MOTORIZE

Fue Punch có động cơ cho tóc dài

- Thép loại 1 của Đức được sử dụng.
- Đầu được làm đặc biệt với các rãnh để ngăn tóc dài bị gãy.
- Có sẵn các phép đo đường kính và chiều dài khác nhau.
- Đã đăng ký với UBB, được Bộ Y tế phê duyệt
- Cung cấp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
- Cấu trúc đầu nhọn đặc biệt mang lại độ nhạy tối thiểu nhất trong mô
- Nó đảm bảo loại bỏ dễ dàng các nang ghép một cách nhẹ nhàng và không gây tổn hại nhất.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	US625	US63	US635	US64	US65
0.6-5	US6525	US653	US6535	US654	US655
0.7	US725	US73	US735	US74	US75
0.7,5	US7525	US753	US7535	US754	US755
0.8	US825	US83	US835	US84	US85
0.8,5	US8525	US853	US8535	US854	US855
0.9	US925	US93	US935	US94	US95
0.9,5	US9525	US953	US9535	US954	US955
1	US125	US13	US135	US14	US15
1,1	US1125	US113	US1135	US114	US115
1,2	US1225	US123	US1235	US124	US125
1,3	US1325	US133	US1335	US134	US135



IHM Fue Motorize



IHM 25 ĐỎ Tay cầm đôi

1 tay cầm tiêu chuẩn
1 tay kim loại xoay phải - trái
35000 vòng/phút Tương thích
với 110 - 220 w



Tay cầm đôi

Sử dụng tiện dụng Tay
cầm nhẹ Tay cầm im
lặng Tay cầm thay thế



IHM

INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

IHM25 ĐỎ

Tay cầm kim loại không bị rò rỉ. Tay cầm bền lâu, dễ sử dụng, vừa vặn với tay, cực kỳ êm và nhẹ. Nó cho phép bạn chiết xuất rễ ghép khỏe mạnh hơn và không làm bạn mệt mỏi.



IHM 25 PINK Tay cầm đôi

1 tay cầm tiêu chuẩn
1 tay kim loại xoay phải - trái
35000 vòng/phút Tương thích
với 110 - 220 w



Tay cầm đôi

Sử dụng tiện dụng Tay
cầm nhẹ Tay cầm im
lặng Tay cầm thay thế



IHM25 PINK

Tay cầm kim loại không bị rò rỉ. Tay
cầm bền lâu, dễ sử dụng, vừa vặn
với tay, cực kỳ êm và nhẹ. Nó cho
phép bạn chiết xuất rễ ghép khỏe
mạnh hơn và không làm bạn mệt
mỏi.




Marathon H37

L tay khoan tiêu chuẩn 35000 vòng/phút xoay phải - trái Khả năng điều khiển tay và chân đốt than, làm mát bằng không khí Tương thích với 110 - 220 w



H 37 L

Màu sắc: Xám Xuất xứ: Hàn Quốc Trọng lượng: 236 Gr Làm mát: Làm mát bằng không khí Hệ thống than

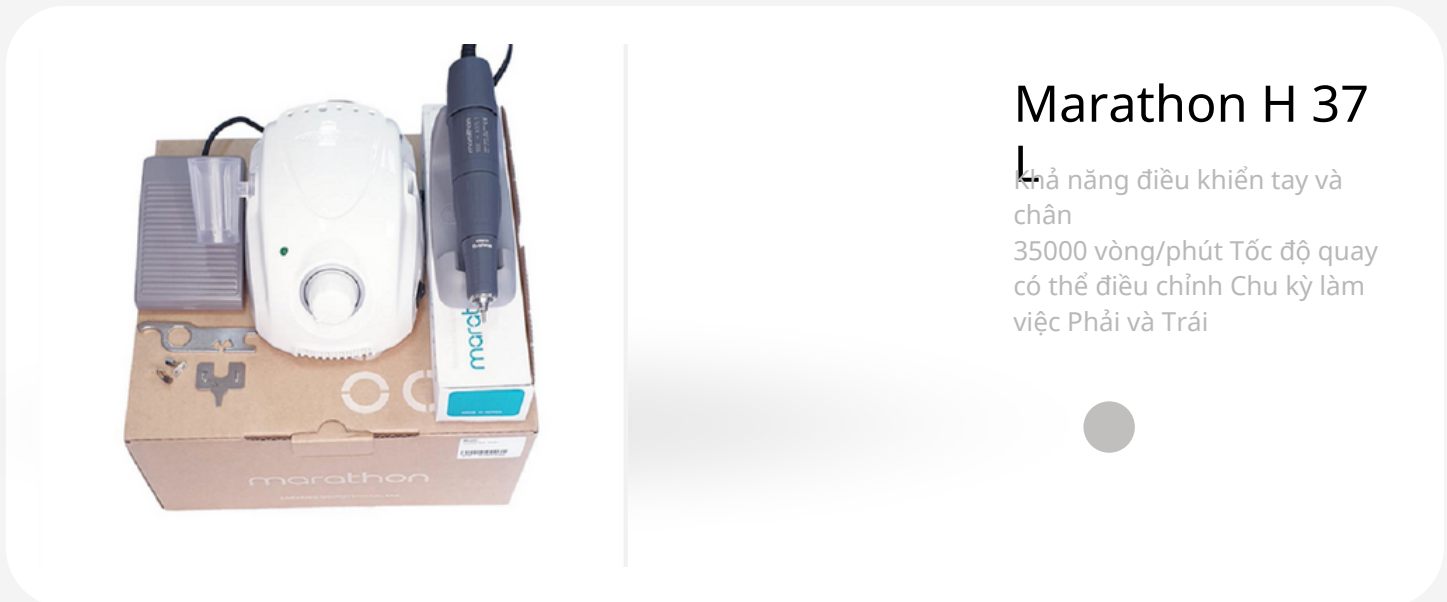

Marathon H 37

L Khả năng điều khiển tay và chân 35000 vòng/phút Tốc độ quay có thể điều chỉnh Chu kỳ làm việc Phải và Trái





Mạnh 210

tay khoan tiêu chuẩn
35000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân đốt than, làm mát
bằng không khí Tương thích
với 110 - 220 w



Mạnh 210

Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Hàn
Quốc Trọng lượng: 236 Gr
Làm mát: Làm mát bằng
không khí Hệ thống than



MİKROMOTOR FUE MOTOR

Saç-qaş aktımı için cihaz
40000 abarot

Mạnh 210

Khả năng điều khiển tay và
chân
35000 vòng/phút Tốc độ quay
có thể điều chỉnh Chu kỳ làm
việc Phải và Trái





Hệ thống 2 Pro SH20N

Tay cầm có đầu kim loại 35000 vòng/phút xoay phải - trái Khả năng điều khiển tay và chân làm mát bằng không khí Tương thích với 110 - 220 W



SH 300

Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Hàn Quốc Trọng lượng: 190 Gr Làm lạnh: Làm mát bằng không khí



Complete set



Vô địch SH20N

Khả năng điều khiển tay và chân 35000 vòng/phút Tốc độ quay có thể điều chỉnh Chu kỳ làm việc Phải và Trái





IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-GRİ

Tay cầm có đầu kim loại
30000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w



IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-SYH

Tay cầm có đầu tiêu chuẩn
35000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w



Anh ấy xanh

KOD: MBOX.IHM-MV

Tay cầm có đầu tiêu chuẩn
35000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w





NÓI VỚI ANH ẤY

MA: MBOX.IHM-KRMZ

Tay cầm có đầu kim loại
30000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w

THÀNH CÔNG KIM LOẠI ĐEN

**KOD: MBOX.IHM-
MTL**

Tay cầm có đầu tiêu chuẩn
30000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w



TAY XANH ĐEN

KOD: MBOX.IHM-MV-01

Tay cầm có đầu tiêu chuẩn
35000 vòng/phút xoay phải -
trái Khả năng điều khiển tay
và chân làm mát bằng không
khí Tương thích với 110 - 220
w





M BOX KORE

MÃ: MBOXK

Tay cầm có đầu kim loại 35000 vòng/phút xoay phải - trái Tùy chọn điều khiển tay và chân làm mát bằng không khí Độ nhạy tay cầm tiện dụng Tương thích với 110 - 220 w

M BOX KIM LOẠI PIYASEMEN

Màu sắc: Trắng - Xanh - Đỏ - Đen
Xuất xứ: Hàn Quốc Trọng lượng: 170 Gr Làm mát: Làm mát bằng không khí

MÃ SỐ: MBOXM



M BOX - Hàn Quốc

Kiểu dáng điều khiển tay và chân
35000 vòng/phút Tốc độ quay có thể điều chỉnh Chu kỳ làm việc Phải và Trái



TRẮNG + XANH + ĐỎ + ĐEN
MÃ: MBOX.B MBOXM MBOXK MBOXS



K38

Portable type
Digital speed window

MH20

Max. 30,000rpm
130g

Động cơ Micro Fue di động có thể sạc lại

KOD: MH20K38

Tay cầm có đầu kim loại 35000 vòng/phút Xoay phải - trái Sử dụng tối đa 6 giờ khi sạc đầy Chỉ báo màn hình kỹ thuật số Kết nối gắn dây đai Tương thích với 110 - 220 w

Động cơ siêu nhỏ có thể sạc lại

Màu sắc: Trắng - Xanh - Đỏ - Đen
Xuất xứ: Hàn Quốc Trọng lượng: 170 Gr Làm mát: Làm mát bằng không khí



Động cơ Micro Fue di động

MÃ: MMŞRJ-01

Chỉ báo hiển thị kỹ thuật số 35000 vòng/phút Tốc độ quay có thể điều chỉnh Chu kỳ làm việc Phải và Trái





Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI

MÃ: BLCK-01D

Tay cầm có đầu kim loại
35000 vòng/phút Xoay phải -
trái Chỉ báo hiển thị kỹ thuật
số
Khả năng điều khiển tay và
chân của Tay cầm 190 Gr
Tương thích với 110 - 220 w

Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI

Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Hàn Quốc
Trọng lượng: 190 Gr Làm lạnh: Làm
mát bằng không khí Digital Panel



Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI

Động cơ vi mô nhiên liệu Profosyonel





Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI S200

MÃ: BLCK-01D

Tay cầm có đầu kim loại 35000 vòng/phút Xoay phải - trái Chỉ báo hiển thị kỹ thuật số Khả năng điều khiển tay và chân của Tay cầm 190 Gr Tương thích với 110 - 220 w

Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI S200

Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Hàn Quốc Trọng lượng: 190 Gr Làm lạnh: Làm mát bằng không khí Digital Panel



Hand
Knee
Foot



Fwd
Rev



Standby
Working



Động cơ Micro Fue kỹ thuật số HMI S200 Profosyonel





KOD:OSLSYN-D.01



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Động cơ vi mô chuyên nghiệp nhất được biết đến Chiropro Plus 50000 vòng/phút Xoay Phải - Xoay Trái ĐIỀU CHỈNH - Tiến-Lùi 360 ĐỘ Tốt nhất để có được chân tóc dài. Tùy chọn đầu có nhiều

Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Bộ cấp và tay cầm có thể hấp tiệt trùng

Bộ phẫu thuật chuyên nghiệp



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Tạo cơ hội để rửa khu vực làm việc bằng chất lỏng - huyết thanh





Marathon - Tay cầm đa năng mạnh mẽ với đầu vào 3 chân, ổ cắm tròn, tương thích với mọi động cơ

35000 vòng/phút Xoay phải trái
Than làm mát bằng không khí
Model
260 gam

Tay cầm thay thế kích thước phổ quát

Mẫu H 37 L



Mẫu H 37 L

Màu sắc: Đen - Xanh





S 30 PIYASEMEN

- Dimensions : L129 x Ø22 (mm)
- Speed : 0 - 30,000 rpm
- Max. Torque : 2.9 Ncm
- Weight : 143g
- Cord length : 1.5m

MÃ SỐ: Y.PYSMN.M-01

35000 vòng/phút Xoay phải trái
Than làm mát bằng không khí
Model
260 gam

S 30 PIYASEMEN



S 30 PIYASEMEN

Màu xám





Đầu tay khoan có thể
hấp được



40000 vòng/phút Xoay phải trái
Than làm mát bằng không khí
Model
95 gam



Đầu tay khoan tiết
trùng bằng kim
loại có thể hấp tiết
trùng

Màu sắc: gir





Cáp tay khoan có thể hấp được



40000 vòng/phút Xoay phải trái
Than làm mát bằng không khí
Model
95 gam



Cáp tay khoan có thể hấp được



Màu sắc: gir





TAY CẦM THAY THẾ



Quỹ N 30



MÃ SỐ: YP.N30

30000 vòng/phút Xoay phải trái
Làm mát bằng không khí Tương thích với tất cả các động cơ có đầu vào đa năng 160 Gr+

TAY CẦM THAY THẾ NBOX IHM ĐỎ

KOD :YP.MBOX-BLACK.KRMZ

30000 vòng/phút Xoay phải trái
Làm mát bằng không khí Tương thích với tất cả các động cơ có đầu vào đa năng 160 Gr+



MẢNH THAY THẾ NBOX IHM MÀU ĐEN

KOD :YP.MBOX-BLACK.SYH

30000 vòng/phút Xoay phải trái
Làm mát bằng không khí Tương thích với tất cả các động cơ có đầu vào đa năng 160 Gr+





Hãy nghĩ về nó

Kẹp lấy và loại bỏ mảnh ghép Gold Series Cấu trúc Tickle có thể được sản xuất đặc biệt. Nó được thiết kế để không làm hỏng các nang ghép.



IHM Toplama Penseti



Gold Serisi Toplama Penseti Size Tablosu

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Khai thác vàng





DHI - CHOI BÚT ĐẶT/ ĐẶT BÚT

Gold Series DHI PEN SERIES FORCET
Cho phép ghép mảnh ghép dễ dàng
vào bút.
Nó giúp sử dụng dễ dàng với tay cầm
tiện dụng và không làm mỏi tay.



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Mảnh bút cấy
ghép vàng Thị /
Kẹp chèn



Kẹp cấy ghép vàng

Kẹp cấy ghép dòng Gold của chúng tôi được làm bằng thép không gỉ y tế 100%. Tùy chọn kẹp đầu cá nhân. Cấu trúc đầu tip Chiều dài đầu tip Tùy chọn góc có sẵn.
Kẹp Gold Series thuộc về Thương hiệu của chúng tôi.

LỰC LƯỢNG QUAN SÁT DÒNG VÀNG

SERIES VÀNG

- Chiều dài mẹo
- Góc đầu
- Độ cứng: Độ bám
- Cấu trúc mẹo

Có tùy chọn


UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT





Kẹp cây ghép có tay cầm đục lỗ bằng vàng

Kẹp cây ghép dòng Gold của chúng tôi được làm bằng thép không gỉ y tế 100%. Tùy chọn kẹp đầu cá nhân. Cấu trúc đầu tip Chiều dài đầu tip Tùy chọn góc có sẵn. Kẹp Gold Series thuộc về Thương hiệu của chúng tôi.

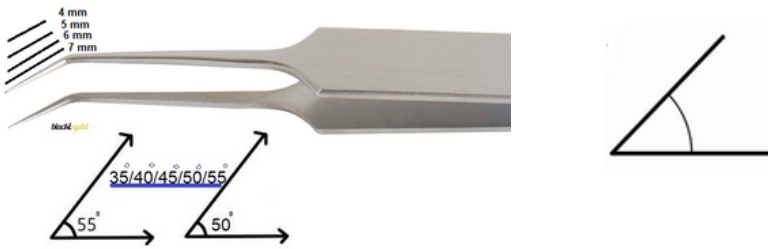

LỰC QUAN SÁT Tay cầm đục lỗ


SERIES VÀNG

- Chiều dài mẹo
- Góc đầu
- Độ cứng: Độ bám
- Cấu trúc mẹo

Có tùy chọn

UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT



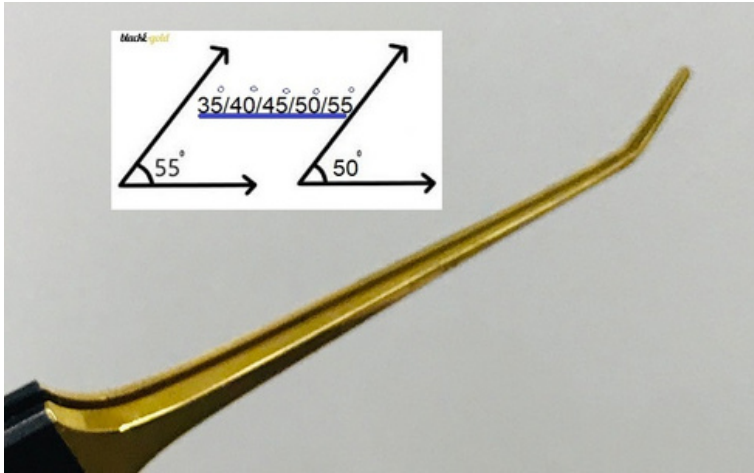


Kẹp cấy ghép mô hình gôm

Dòng sản phẩm kẹp gieo hạt gôm của chúng tôi

Grip Handle Tay cầm phủ gôm;

- Không gây ra mồ hôi
- Nó chống tĩnh điện, không gây ra điện
- Đầu mạ vàng không dính vào mảnh ghép
- Cung cấp cơ hội trồng dễ dàng và khỏe mạnh

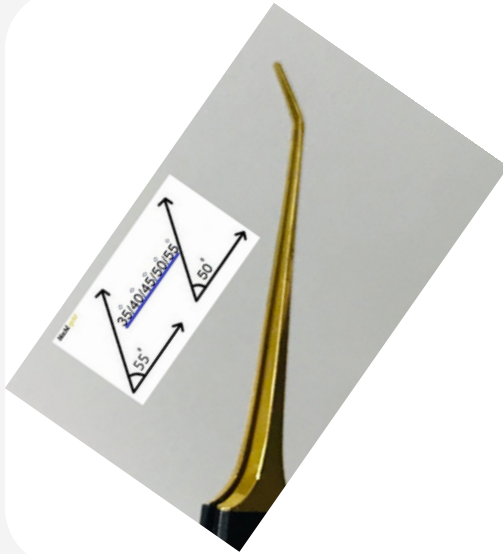

UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT







Kẹp cấy ghép mô hình Titan



Đó là một mô hình titan.
Nó nhẹ hơn và bền hơn



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT

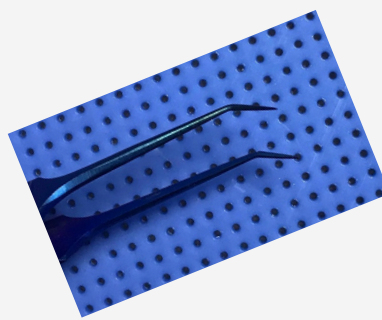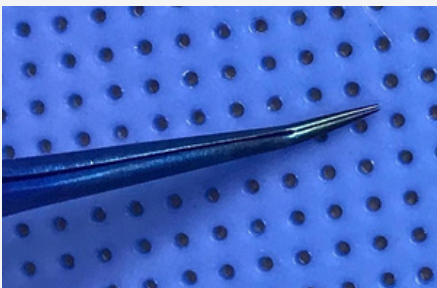




Dòng kẹp Titan Moon Mã số: TAP-01

Đó là một loạt titan. Nó phù hợp cho nhiều năm sử dụng. Nó có thể được khử trùng. Nó là một sản phẩm có thể tái sử dụng về mặt y tế. Nó được sử dụng cho mục đích chung trong việc cấy - thu - căn chỉnh hoặc đặt bút Dhi.

LÀ KÌM

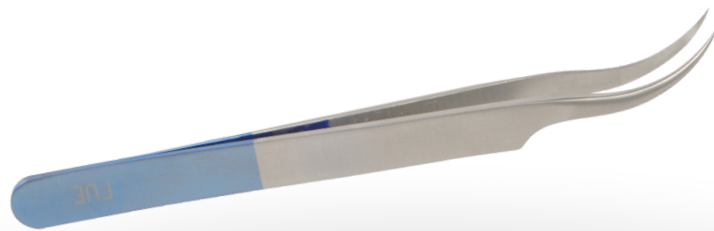

ĐEN & VÀNG LÀ BÚT
CHÌ






Kẹp mỏng vàng

Đó là dòng Vàng.
Nó được thiết kế để sắp xếp và tách các nang trong mảnh ghép trán.
Nó có cấu trúc đầu mỏng sẽ không làm hỏng mô. Nó là thép y tế không gỉ 100%.

Ghế sofa

Mũi kim thẳng Dòng sản phẩm VÀNG Kẹp mỏng

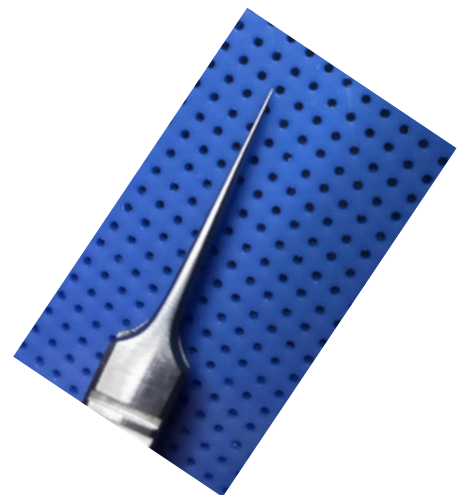



Loại bút có tay cầm trượt

Mã số: STH-K

- Đó là dòng Vàng
- Nó có một đầu kim cương. Nó không trượt.
- Giữ dao trượt ở mọi kích cỡ
- Nó dài 15cm
- Nó nặng 50gr
- Cung cấp khả năng giữ an toàn với kẹp nén của nó
- Nó có đầu kim cương cho phép nén ở một góc.
- Cung cấp công thái học và sử dụng dễ dàng

TAY CẦM KHÓA TAY TRƯỢT

Mã số: STH-DK

- Đó là dòng Vàng.
- Nó giữ chặt tất cả các loại lược trượt, kể cả những thanh trượt dày hơn và không bao giờ bung ra.
- Nó có đầu kim cương
- Được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật cấy tóc
- Tay cầm ngang là thiết kế tuyệt vời dành cho những người có thói quen làm việc.



TAY TAY TRƯỢT TIÊU CHUẨN

MÃ SỐ: STH-SM

- Đầu kim cương dòng vàng
- Lược trượt giữ được mọi kích cỡ
- Nó dài 14 cm -15 cm
- Không cuộn
- Được sử dụng trong phẫu thuật tóc và phẫu thuật thẩm mỹ
- Nó là thép không gỉ y tế 100%



BÚT FUE THỦ CÔNG và TAY KIM

Mã số: MFPH-02

- Đó là đồng Vàng
- Kích thước phổ quát là punch tutar
- Kích thước phổ quát giữ đầu kim
- Nó có đầu nén có thể điều chỉnh
- Thu hoạch ghép thủ công
- Nó được sử dụng trong các hoạt động mở ống tủy qua da bằng tay bằng cách đưa kim vào.
- Tay cầm có răng cưa giúp cầm nắm dễ dàng và chống trượt
- Nó là thép y tế không gỉ 100%

DAO - TAY KIM

Mã số: MFPH-01

- THÂN NHÔM
- Đầu nén có thể điều chỉnh
- Đầu nén 4 góc
- Vật liệu y tế không rỉ sét
- Nó được sử dụng trong các hoạt động được thực hiện bằng cách cầm kim và dao.
- Cấy tóc - Xăm - Tạo rãnh qua da và Phẫu thuật thẩm mỹ là những lĩnh vực sử dụng chính.



BISTÜRİ XỬ LÝ

MÃ: BSTR-15

- 100% THÉP Y TẾ
- NÓ TƯƠNG THÍCH VỚI LƯỠI QUY MÔ SỐ 11-15
- LÀ LOẠI BÚT NÓ MANG LẠI CƠ HỘI LÀM VIỆC RẤT THOẢI MÁI VÀ THOẢI MÁI





NGƯỜI GIỮ SAPPHIRE

MẪU TITANIUM CHỈ ĐỠ SAPPHIRE TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ CÁC SỐ NÓ LÀ MẪU KÍCH THƯỚC PHỔ BIẾN



LƯỠI SAPPHIRE

- LƯỠI SAPPHIRE LÀ MẪU GỐC.
- ĐA NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ CÁC BÚT
- CÓ THỂ TỰ ĐỘNG - Tiết trùng
- CHỐNG DỊ ỨNG
- CHƯƠNG TRÌNH MÔ TỐI THIỂU VỚI VẤN CHIA TỐI THIỂU
- PHỤC HỒI NHANH HƠN NHIỀU
- SỐ ĐÃ CÓ SẴN CHO BẠN



KÍCH CỠ :

1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7






SP 90 LƯỠI TẠO TRÙNG ĐẶC BIỆT

SP 90 LƯỠI NHỎ

- 0,8mm
- 0,9mm
- 1,0mm
- 1,1mm
- 1,2mm
- 1,3 mm
- 1,4 mm
- 1,5 mm 1,6 mm 1,7 mm

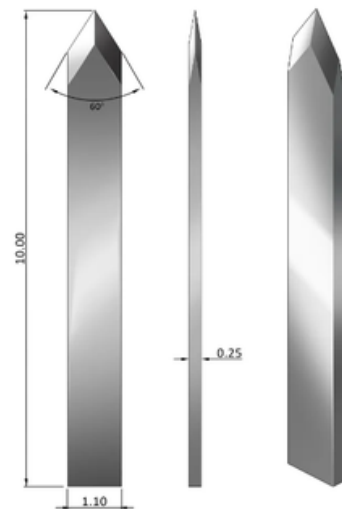

lưỡi tạo rãnh



TRƯỢT CẮT TRƯỚC


Nó được cắt bằng máy đặc biệt và hoàn toàn mịn và sắc nét.

Nội dung đóng gói: 25 miếng

- KÍCH CỠ**
- 08 - 1 - 1,1
 - 1,2 - 1,3 - 1,4
 - 1,5 - 1,6 - 1,7



OKT'nin 10 Avantajı

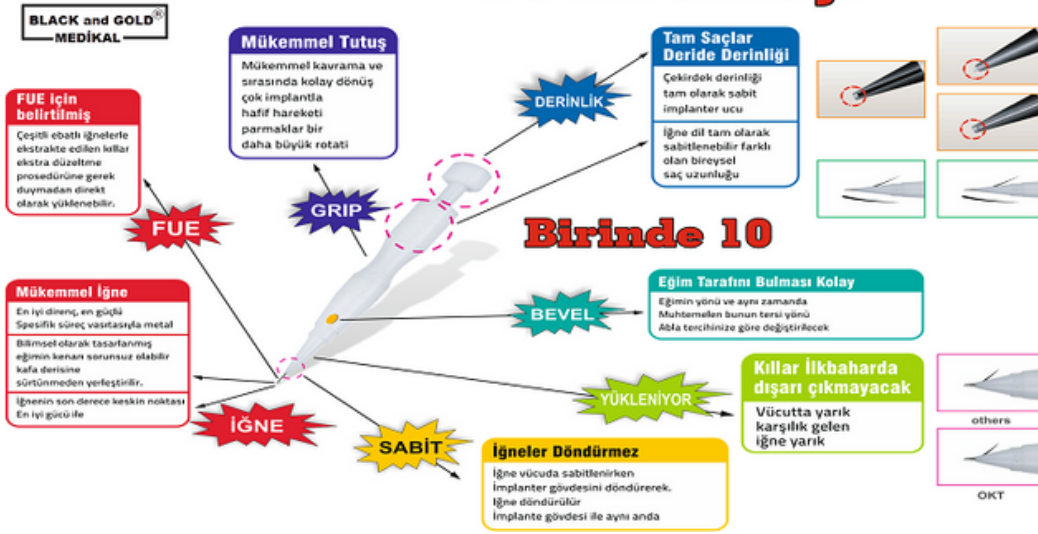

Bút cấy ghép OKT Choi


- Đó là bút cấy tóc y tế
- Sử dụng trong cấy tóc tự nhiên
- Cung cấp cơ hội trồng dày đặc hơn và thường xuyên hơn
- Trồng cây dễ dàng hơn
- Khả năng đưa ra hướng trong khi đặt từng gốc
- Có thể được khử trùng
- Nó là một sản phẩm có thể tái sử dụng
- Chỉ có những chiếc kim được thay đổi khi chúng trở nên cùn.
- Có sẵn hộp 10 chiếc
- Có nhiều con số khác nhau
- cây tóc
- Sakal Ekiimi
- Cấy lông mày

Cấy ghép OKT Dhi

Nó được điều chỉnh bằng cách xoay vòng tròn trong khu vực Kẹp Đầu Kim. Xoay sang trái: MỞ RỘNG đầu kim. Xoay sang phải: Rút ngắn đầu kim



MAVI - 0,9 mm
ĐỎ - 1.02mm

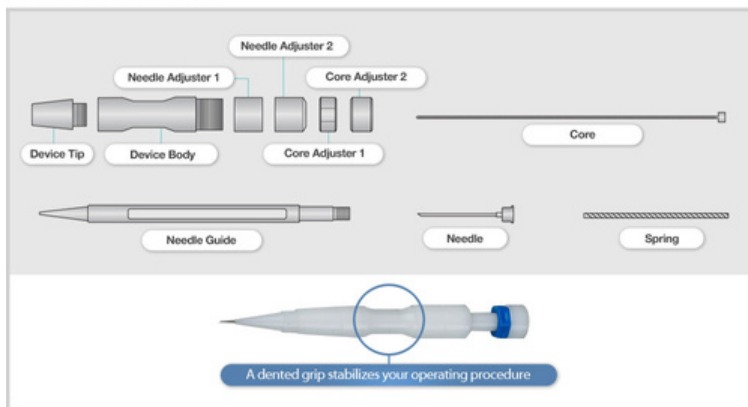

OKT DHİ KALEM NUMARALARI

MÀU XANH: Thích hợp cho ghép đơn và ghép đôi

Nó được sử dụng trong cấy ghép tóc phía trước, thắt chặt, cấy râu và lông mày.

ĐỎ: Thích hợp cho 1 -2 -3 -4 -5 Cây ghép

Nó được sử dụng trong thâm canh.

Lưu ý: Thông thường, một bộ bao gồm 4 Xanh + 6 Đỏ.

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC



MAVI: 0,8 mm



Bút cấy ghép INCURAM

- Đó là bút cấy tóc y tế
- Sử dụng trong cấy tóc tự nhiên
- Cung cấp cơ hội trồng dày đặc hơn và thường xuyên hơn
- Trồng cây dễ dàng hơn
- Khả năng đưa ra hướng trong khi đặt từng gốc
- Có thể được khử trùng
- Nó là một sản phẩm có thể tái sử dụng
- Chỉ có những chiếc kim được thay đổi khi chúng trở nên cùn.
- Có sẵn hộp 10 chiếc
- Có nhiều con số khác nhau
- cấy tóc
- Sakal Ekiimi
- Cây lông mày

Bất Cần Về Cấy Ghép

Implant chỉnh bằng cách xoay vòng tròn trong khu vực Kẹp Đầu Kim. Xoay sang trái: MỞ RỘNG đầu kim. Xoay sang phải: Rút ngắn đầu kim

ĐỎ: 0.9mm



TRẮNG: 1mm





Bút cấy ghép INCURAM



- Đó là bút cấy tóc y tế
- Sử dụng trong cấy tóc tự nhiên
- Cung cấp cơ hội trồng dày đặc hơn và thường xuyên hơn
- Trồng cây dễ dàng hơn
- Khả năng đưa ra hướng trong khi đặt từng gốc
- Có thể được khử trùng
- Nó là một sản phẩm có thể tái sử dụng
- Chỉ có những chiếc kim được thay đổi khi chúng trở nên cùn.
- Có sẵn hộp 10 chiếc
- Có nhiều con số khác nhau
- cấy tóc
- Sakal Ekiimi
- Cấy lông mày

Kim dự phòng incuram XANH : 0.8 mm




Kim dự phòng incuram ĐỎ: 0,8 mm





Kim dự phòng incuram: Trắng 1 mm

Bút cấy ghép
INCURAM Kim dự
phòng

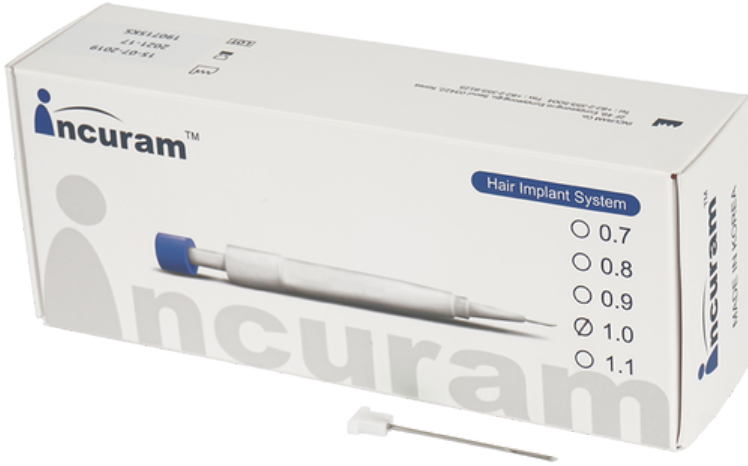

Kim dự phòng incuram ĐEN: 1.1 mm




1,1 mm 1,0 mm 0,9 mm 0,8 mm

Nội dung hộp: 10 miếng Tiệt trùng Thích hợp để tái sử dụng Đầu kim y tế Incuram Xuất xứ: Hàn Quốc.

LƯU Ý: Màu trắng và xanh được sử dụng chủ yếu



KÉO PHẪU THUẬT

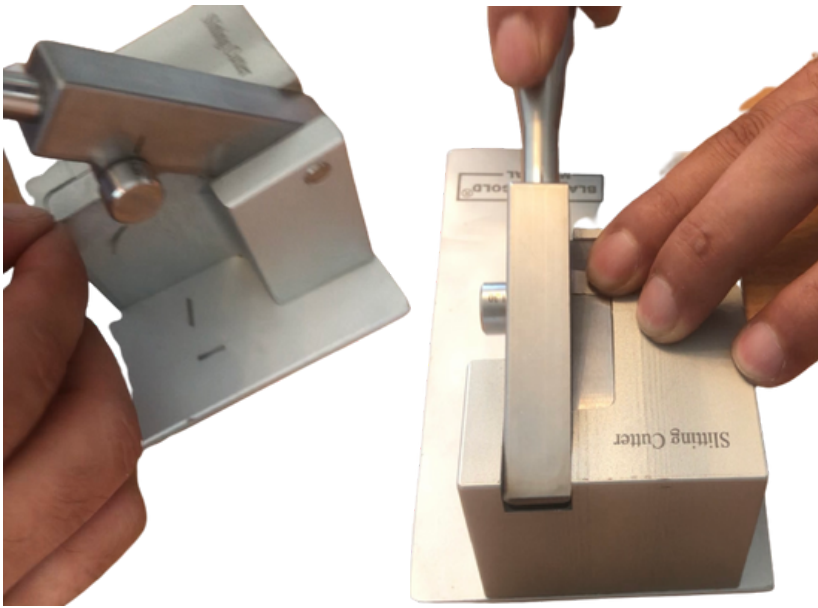


- THÉP Y TẾ
- SERIES VÀNG
- MẸO KIM CƯƠNG
- MỎNG MỘT MẶT
- MẶT KHÁC LÀ TIÊU CHUẨN
- CẮT TRƯỢT
- CÁCH ĂN MẶC
- PHẪU THUẬT

Nó được sử dụng trong các lĩnh vực

MÁY CẮT TRƯỢT

- THÂN THÉP Y TẾ THÉP KHÔNG GỈ
- ĐẦU KIM CƯƠNG NHÂN ĐÔI MẶT
- CẮT MỊN
- CẮT ĐẾN SỐ MONG MUỐN
- CẮT Ở GÓC MONG MUỐN
- BẠN CÓ THỂ THIẾT KẾ TRƯỢT CỦA RIÊNG MÌNH VÀ CẮT NÓ THEO BẤT CỨ KÍCH THƯỚC VÀ CHIỀU DÀI NÀO BẠN MUỐN.
- NÓ CÓ THỂ CẮT TỐI THIỂU 5.000.000 LƯỠI TRƯỢT MỊN.

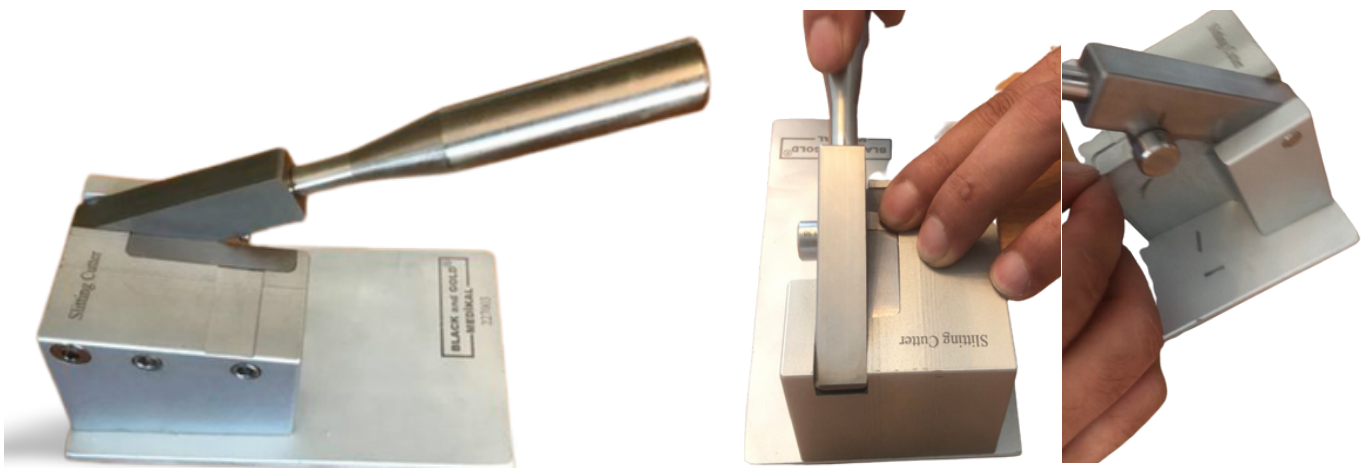



ĐƠN VỊ CHẮC CHẮN GHÉP BLUE ICE


- THỂ TÍCH NGĂN TRONG 10 PETRILES
- NGĂN LÀM LẠNH 4-12 ĐỘ
- ĐIỀU CHỈNH TỈ LỆ ĐỘ ẨM CỦA MÔ
- ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PH MÔ
- PHÒNG NGỪA NHIỄM TRÙNG BẰNG TỬ KHỬ TRÙNG
- GIỐNG SỐC VÀ VẮC-XIN CỘNG ĐỒNG + CẢM TRỊ LIỆU TRỊ LIỆU VỚI ĐỘNG CƠ VẮC-XIN

**QUAN TRỌNG NHẤT, TẤT CẢ CÁC THỦ TỤC NÀY;
NÓ CUNG CẤP KHẢ NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT TỪ BẢNG KỸ THUẬT SỐ**

NÓ LÀ THIẾT BỊ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LÂM SÀNG VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ISO + CE+ EC+ GS1 + EU

- KHỐI LƯỢNG NỘI THẤT LỚN
- KIỂM SOÁT KỸ THUẬT SỐ TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG
- HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRONG TRƯỜNG HỢP TIÊU CỰC CÓ BÁO ĐỘNG ÂM THANH

MÔ TẢ ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG THIẾT BỊ NÀY ĐẢM BẢO RẰNG HỌ CÓ THỂ SỐNG KHỎE MẠNH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CHỈ NHƯ CÁC MÔ SỐNG. NÓ HỖ TRỢ TĂNG TỶ LỆ SỐNG SỐNG BẰNG CÁCH KIỂM SỐC CÁC LOẠI BẢO MỎNG VÀ BIẾN THÀNH THÀNH MÔI CẤP MỆT MỎI TRONG QUÁ TRÌNH. NÓ HỖ TRỢ VIỆC CHỮA LẠNH CỦA MÔI CỘT ĐƯỢC TẠO NHANH HƠN NHANH HƠN VÀ SỰ DÍNH CỦA CHÚNG VỚI MÔ. NÓ CUNG CẤP QUY TRÌNH Cấy TÓC KHỎE MẠNH NHẤT + ĐÁNG TIN CẬY NHẤT + TỰ NHIÊN NHẤT.

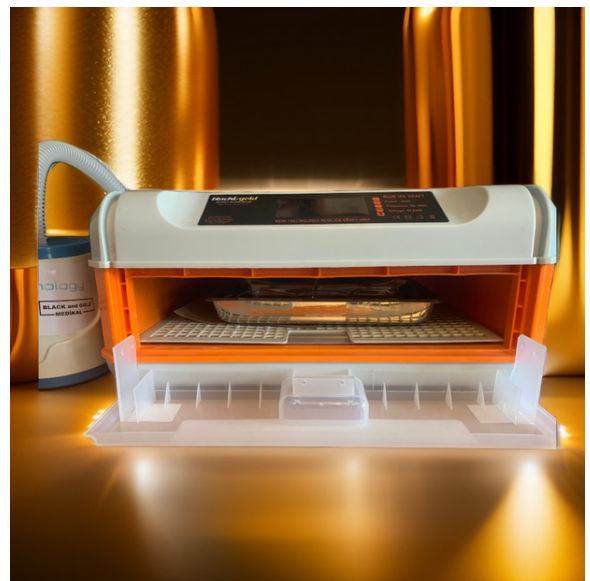


KÍCH THƯỚC

60 X 60 X 30 CM KOLÌ
TỔNG 16 KG AGIRLIK
110/220 W LÀM VIỆC UVC KHỬ TRÙNG

NỘI DUNG HỘP

- Hướng dẫn sử dụng
- giấy chứng nhận bảo hành
- Động cơ ghép
- đơn vị chính
- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn mô tả sản phẩm

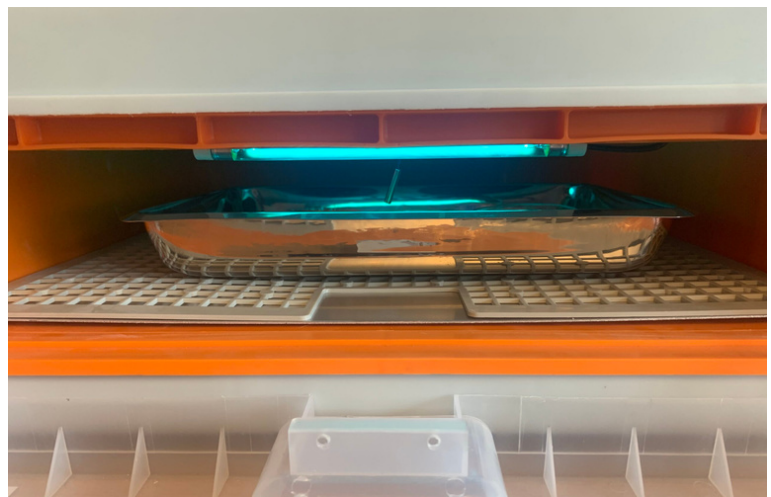



DERMOJET

Tiêm và gây mê không đau



Có thể tiết trùng. Nó có buồng chứa thuốc 5 cc, không có vật tư tiêu hao, là sản phẩm y tế, bạn cho thuốc vào và sử dụng, không có kim, hoạt động bằng áp lực. Nó tạo ra áp lực riêng khi bạn kéo và thả nút vặn.



Thiết bị gây mê không đau

SỬ DỤNG TIỆN DỤNG,
KHÔNG SỢ KIM, KHÔNG ĐAU,
TIẾT KIỆM THỜI GIAN SỬ
DỤNG NHANH CHÓNG,
KHÔNG CHẢY MÁU, MANG
LẠI MỘT QUY TRÌNH THOẢI
MÁI





Bút gây mê rung

6000 mỗi phút SÓNG RUNG

- Cung cấp 6000 rung động mỗi phút
- Hoạt động bằng pin
- Nó được kích hoạt bằng cách chạm vào khu vực gần khu vực đó ngay trước khi tiêm. Vì bộ não con người cảm nhận được rung động nhanh hơn và sớm hơn nên sẽ đảm bảo rằng bệnh nhân không cảm thấy kim đâm vào.
- Theo một cách nào đó, chúng ta sẽ đánh lừa bộ não của mình.

Thiết bị gây mê rung

- ỨNG DỤNG GÂY MÊ
- ỨNG DỤNG TIÊM
- ĐƠN VỊ CHẮC-XIN
- ỨNG DỤNG ĐỔI
- ỨNG DỤNG BOTOX

Lĩnh vực sử dụng chính



Bút gây mê rung vàng



2.0X Auxilliary Objective Lens



0.5X Auxilliary Objective Lens



High Temperature Resistant Working Pad



CHUYÊN NGHIỆP

Mã số:
Mcrskp.01



CHUẨN BỊ GHÉP + KÍNH HIỂN VI CHUẨN BỊ nang

Mô tả Sản phẩm :

1. Màn hình hiển thị: Được trang bị màn hình LCD 7 inch, cảm biến CMOS 26MP, độ phóng đại kỹ thuật số 2100 lần, mang lại hình ảnh có độ phẳng và độ tương phản rõ nét tốt.
2. Kính hiển vi: Kính hiển vi có thấu kính đầu nghiêng 45 độ và nòng thị kính xoay 360 độ, hỗ trợ thu phóng 6,5: 1, đảm bảo căn chỉnh chính xác và giảm mỏi thị giác.
3. Tay nghề tinh tế: Tất cả các thành phần kính quang học đều sử dụng thấu kính thủy tinh chính xác, vật liệu hợp kim nhôm có độ cứng cao, khoảng cách đồng tử có thể điều chỉnh, hỗ trợ giao diện đa phương tiện độ phân giải cao và đầu ra video USB.
4. Đèn vòng: Được trang bị đèn vòng kính hiển vi nhỏ gọn, cung cấp ánh sáng cường độ cao và tập trung không có bóng với hướng và cường độ chiếu sáng có thể điều chỉnh, có thể sử dụng trong thời gian dài.
5. Ứng dụng rộng rãi: Quy trình phân tích y học + Quy trình cấy ghép tóc Quy trình tách mảnh ghép + Quy trình lấy và kiểm tra nang tóc ghép

Đặc trưng:

Loại sản phẩm: Kính hiển vi soi nổi ba mắt Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính hiển vi ba mắt ABS
 Đầu: Kính hiển vi ba mắt đồng tiêu xoay 360° có thể nghiêng 45° Thị kính: Trường nhìn cực rộng 30mm/1,18in WF10X/20 với thấu kính có độ phóng đại cao + Thấu kính vật kính: 0,7-4,5 lần Phạm vi thu phóng: 6,5:1 + Điểm kết nối ba mắt: Xấp xỉ. Cổng quang 23 mm/0,91 inch Khoảng cách đồng tử: Xấp xỉ. 2 1/8 inch đến 3 inch (54-76mm) + Trường nhìn: Khoảng. 1 1/4in (33mm) Khoảng cách làm việc: 7X-45X (100mm/3,94in), 7X-90X (40mm/1,57in) Vật kính 2.0x Giá đỡ đầu ống kính: Xấp xỉ. Đường kính 3in (76mm) + Lắp vừa vặn: Xấp xỉ. Đường kính 1 7/8 inch (ren trong 48 mm)
 Tính năng camera kính hiển vi 7 inch: Cảm biến hình ảnh: Cảm biến độ phân giải cao 26MP CMOS

Nội dung hộp;

KÍNH HIỂN HÌNH + ĐẦU ĐÈN LED + MÀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ LCD + BÀN LÀM VIỆC CHỐNG TRẦY XƯỚC + CÁP KẾT NỐI + KẾT NỐI CAMERA KÍNH HIỂN HÌNH + CÁP KẾT NỐI + ADAPTER

Kích thước: 25 x 30 x 30 cm Kích thước hộp
Trọng lượng hộp 8 Kg





Y tế tóc quốc tế

Kính hiển vi phân tích ghép



Kính hiển vi phân tích mảnh ghép + nang trứng

Mã số: **MCRSKP.02**

1 ĐỐI VỚI PHẪU THUẬT CÂY TÓC;

- **TÁCH GHÉP**
- **HÌNH ẢNH nang**
- **NỀN VĂN HÓA GỐC**
- **PHÂN TÍCH SAU TÓC**

Kính hiển vi kỹ thuật số có bàn làm việc và màn hình có đèn LED sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của bạn trong các hoạt động như

Kính hiển vi kỹ thuật số 3D HD



GREAT DEPTH OF FIELD, REAL 3D EFFECT

Image rotate Inverse Line Setting Black & white

FUNCTIONAL REMOTE

CUNG CẤP HIỂN THỊ HIỆU ỨNG 3D Các phụ kiện có thể điều chỉnh: giá đỡ, màn hình LCD và đèn LED kép có thể được điều chỉnh tự do

Xử lý hình ảnh và điều khiển từ xa IR Ống kính chất lượng cao và cảm biến CMOS nhạy + Hình ảnh được hiển thị nhanh chóng từ màn hình và có độ sâu tốt. + Bộ lọc UV trên ống kính còn giúp giảm phản xạ.

Tích hợp 8 đèn LED có thể điều chỉnh: Ngoại trừ 2 đèn LED ở hai bên chân đế, đèn tích hợp trong ống kính giúp đèn chiếu sáng đầy đủ hơn. Bạn có thể tự do điều chỉnh khẩu độ của tất cả các đèn LED.

Chụp và ghi âm: Bạn có thể chụp ảnh và quay video bằng điều khiển từ xa hoặc nút trên màn hình (Video và hình ảnh có thể được lưu vào thẻ micro SD hỗ trợ tối đa 32G) Chi tiết:

Cảm biến hình ảnh: Cảm biến 2 Mega Pixel HD Đầu ra video: FHD1920x1080 30FPS; HD1280x720 30FPS
 Định dạng video: MOV Độ phóng đại: Lên tới 100 lần Độ phân giải ảnh: 1920X1080 Định dạng ảnh: JPG
 Phạm vi lấy nét: 6CM-18CM Tốc độ khung hình: Max. 30f/s Bảo quản: Thẻ microscope-SD, tối đa 32G Nguồn điện: 5V DC Nguồn sáng: 8 đèn LED tích hợp và 2 đèn LED trên chân đế Kích thước màn hình: 7 inch Kích thước chân đế: 20cm * 12cm * 19cm Chứng nhận: CE / FCC / RoHS Gói hàng bao gồm: Kính hiển vi x 1 Chân đế kim loại x 1 + Hướng dẫn x 1 Điều khiển từ xa IR x 1 + Cáp chuyển đổi x 1 Bộ đổi nguồn x 1 + Bộ lọc UV x 1 Nắp ống kính x 1 Dữ liệu đóng gói 32 * 22 * 10cm / 1.55 Kilôgam



Bộ phân tích chuyên nghiệp Mã số: AK.01


Kết nối Wifi không dây ĐIỆN THOẠI + MÁY TÍNH BẢNG + MÀN HÌNH MÁY TÍNH và TIVI
Kết nối được thực hiện

Bạn có thể tự động lưu hồ sơ bệnh nhân của mình.
Bạn có thể ghi lại ảnh và video chỉ bằng một cú nhấp chuột trên máy tính bảng hoặc máy ảnh. Nó có cài đặt LIGHT + ZOOM + FOCUS.
Có kèm theo phần mềm cài đặt



Máy phân tích da và tóc chuyên nghiệp Mô tả

- BẢNG 10,1 inch + Bàn phím không dây + Vỏ bảo vệ đặc biệt + Bộ nhớ ngoài
- Tính năng chụp ảnh Xem tức thì chỉ bằng một cú nhấp chuột
- Tính năng Trước - Sau khi ghi
- Màn hình hiển thị có thể điều chỉnh và thu phóng 1600 Pixel không dây
- Camera thông minh Wifi không dây
- Giá đỡ máy tính bảng có thể điều chỉnh bằng chân đứng (có thể điều chỉnh độ cao và 360 độ)
- Với bảo đảm Genpa Türkiye + Bảo hiểm y tế Blackandgold

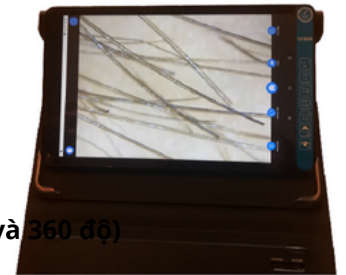

Nó mang đến cho bệnh nhân của bạn cơ hội thực hiện phân tích tóc và da dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng trực tiếp máy tính bảng.

Nó mang đến cơ hội chụp ảnh và quay video trong quá trình phân tích.

Nó cho thấy kết quả rõ ràng về hướng, mật độ, số lượng mảnh ghép và tính chất mảnh ghép của nang tóc.

Nếu người đó có bệnh lý về da đầu sẽ được bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn.


Nó giúp đo trực quan tỷ lệ mỡ trên da. Nó hình dung rõ ràng cấu trúc da và cung cấp hình ảnh có chiều sâu.

Kích thước hộp: 20 x 20 x 10 cm Trọng lượng 650 Gr



Camera phân tích USB Mã số: AK.02


USB đã kết nối
Camera phân tích da và tóc
1600 x

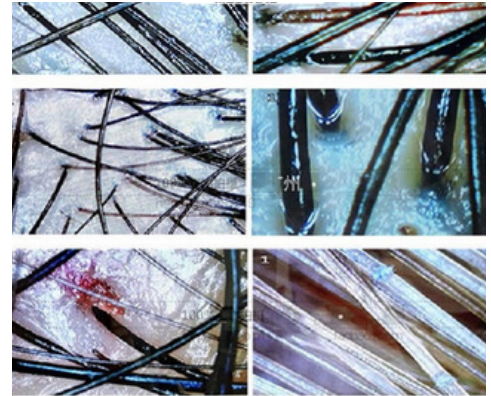

Điện thoại USB + Máy tính bảng + Kết nối máy tính

Máy phân tích tóc và da 1000 X - 1600 X THIẾT BỊ KẾT NỐI TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI Kỹ Thuật Số USB CÓ TRONG BỘ SẢN PHẨM.

- Máy phân tích tóc và da 1000 X USB kỹ thuật số
- Truyền hình ảnh được kết nối USB
- Thiết lập dễ dàng

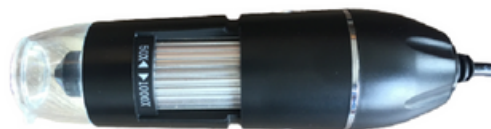



Camera phân tích tóc và da

GIẢI TRÌNH ;

- Hướng dẫn sử dụng
- bộ sạc
- Máy ảnh 1600X
- Bộ chuyển đổi kết nối điện thoại + máy tính bảng

Kích thước: kích thước hộp 15 x 10 x 7 cm

Trọng lượng 340g

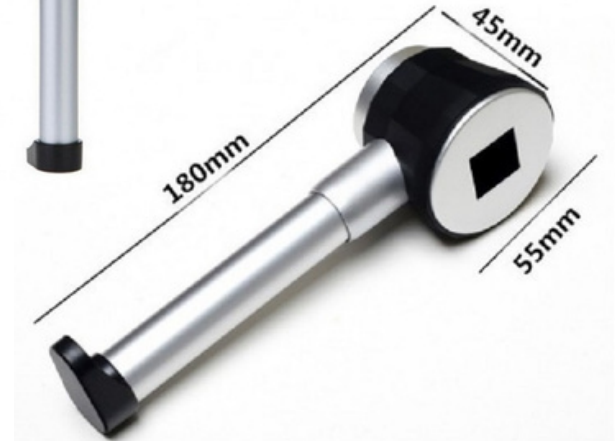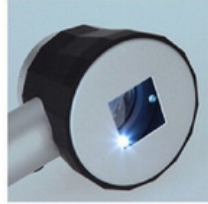

MÁY SOI DA có đèn LED

Mã số: DRM-01

SCALLI TUYỆT VỜI

Mã số: DRM-02

Kính lúp Scala chiếu sáng loại da liễu dùng trong phân tích da Mô tả: 15 x 5 x 5 cm 250 Gr



El Tipi KIỂU DA

Mã số: DRM - 03

Tỷ lệ phóng đại 40X - Độ chính xác của phép đo: Độ chính xác của thang đo 0,05 mm Chiếu sáng: Màu trắng LED Màu đèn: Trắng Cách sử dụng:

Nó được sử dụng để thực hiện các phân tích sâu theo khu vực trong Da liễu và Phẫu thuật Thẩm mỹ. Nó được sử dụng để phân tích sâu các thành phần sâu trong da, lớp mỡ và da. Thang đo Đường kính tổng: Đường kính tổng 4 mm Kích thước: 140 x 45 x 23 mm 350 Gr Phạm vi đóng gói 1 kính lúp, 1 bao da, Nguồn điện + 2 pin AA (Không kèm theo hộp).



KÍNH GIA CÔNG LASER

Mã số: **LGZLK-01**



Mô tả Sản phẩm ;

Là bộ kính dùng trong các thiết bị laser dùng trong các trung tâm cấy tóc và lĩnh vực Thẩm mỹ - Thẩm mỹ y khoa.

Trung tâm cấy tóc

Khoa thẩm mỹ y tế Kính bảo vệ tẩy lông

Laser Salon 200-1200nm

200nm - 1200nm

BỘ KÍNH GIA CÔNG LASER

Mã số: **LGZLK-02**

Bộ kính xử lý laser

Mô tả Sản phẩm ;

Là bộ kính dùng trong các thiết bị laser dùng trong các trung tâm cấy tóc và lĩnh vực Thẩm mỹ - Thẩm mỹ y khoa.

Bộ sản phẩm có 2 ly, một dành cho bệnh nhân và một dành cho người dùng.

Trung tâm Cấy tóc Khoa Thẩm mỹ Y khoa Nhỏ lông bằng Laser Salon

Kính bảo hộ 200-1200nm-200nm - 1200nm



IPL LAZER
DANIŞAN KORUYUCU GÖZLÜK
SIYAH



THỦ TỤC LASER KÍNH BỆNH NHÂN

Mã số: **LGZLK-03**

Xử lý bằng laser Kính bệnh nhân

Thích hợp cho các quy trình thẩm

mỹ và Laser Bảo vệ kính bệnh nhân

thẩm mỹ Bước sóng: 190Nm-

2000Nm Tất cả các bước

sóng Od 5+ Vật liệu nhựa hấp

thụ Được sử dụng rộng rãi trong

trường Laser và vũ trụ Hấp thụ tính

điện, tia cực tím có hại hơn 99,9%



KÍNH VÒNG

LUP-01

Kính lúp có đèn chiếu sáng

- Ống kính ghép linh hoạt có độ phóng đại cao
- Có thể điều chỉnh độ sáng lên xuống
- Đầu vít điều chỉnh lên xuống
- Tỷ lệ zoom ống kính kép 3x
- Dây đai trùm đầu có thể điều chỉnh và mở rộng dễ dàng
- Ống kính: 1,8x, 2,3x, 3,7x, 4,8x



KÍNH VÒNG

LUP-02

Kính lúp có đèn chiếu sáng Series 9

ĐẶC TRƯNG

- Mua hàng: 1x, 1.7x, 2X, 2.5x, 4.5x
- Chất liệu: kính lúp loại abs, acrylic, jead
- Hai chiếc đèn super led + Pin: 2 AAA

SỬ DỤNG ;


- Kính lúp đeo đầu được chiếu sáng 5
- Có thể sử dụng 2 ống kính cùng lúc
- Đồng thời, độ phóng đại có công suất 8X.
- Chất liệu nhựa ABS và thấu kính acrylic trong suốt.
- Headband có thể điều chỉnh dễ dàng.



KÍNH VÒNG

LUP-03

Zoom 3x Điều chỉnh headband tiện dụng Điều chỉnh góc ống kính

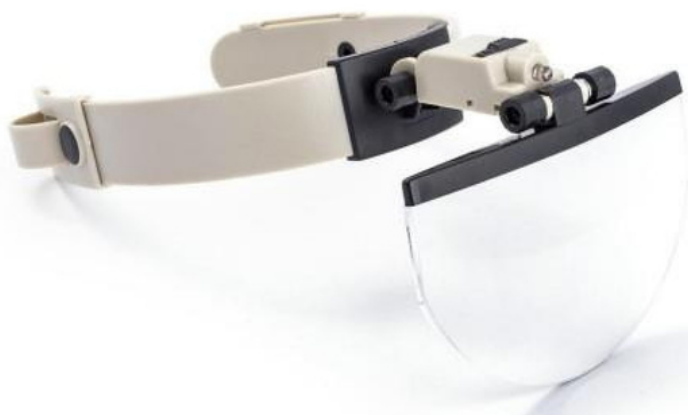



KÍNH VÒNG

LUP-04



Loại mũ Kính lúp có đèn LED Kính lúp loại mũ có đèn LED 9x Zoom 5 (Thu phóng gấp 9 lần)
 Nhờ tính năng phóng đại từng lớp, nó sẽ cho phép bạn xem các vật thể một cách chi tiết.
 Nhờ có 5 ống kính khác nhau, bạn có thể sử dụng ống kính theo nhu cầu của mình.
 Ống kính có khả năng zoom 1.0x - 1.5x - 2x, 2.5x và 3.5x.
 Nó cung cấp thêm khả năng thu phóng vì nó có khả năng thêm nhiều ống kính vào mũ.
 Ống kính kết hợp linh hoạt, tỷ lệ phóng đại cao, Đèn có thể điều chỉnh lên xuống, Kính có thể điều chỉnh ở hai điểm khác nhau lên xuống. Các ngành và lĩnh vực sử dụng:

- Phòng khám cây tóc - chuyên gia cây tóc
- Trung tâm làm đẹp
- Thông số kỹ thuật:
- Đèn LED + Hoạt động với pin từ xa + Đầu điều chỉnh được
- 5 ống kính với các tính năng zoom khác nhau

Gói bao gồm :

- 1 Mũ + 5 tròng kính trong hộp + 3 Pin Remote

Kích thước ống kính: Kích thước ống kính mỗi chiều rộng 10,8cm chiều cao 4cm

- Kích thước mũ: Chiều rộng: 17,6cm Độ sâu: Có thể thay đổi Chiều cao: Có thể thay đổi

Nó mang lại khả năng sử dụng tiện dụng + Đây là một mẫu nhẹ và hữu ích. Nó đặc biệt dành cho các thủ tục cây tóc và các can thiệp y tế thẩm mỹ tương tự.

KÍNH VÒNG

LUP-05

Kính lúp có đèn chiếu sáng Series 5

3 Ống kính phóng đại chuyên nghiệp dự phòng Mẫu đèn LED có thể sạc lại Đèn chiếu sáng chuyên nghiệp Cung cấp khả năng sử dụng tiện lợi Mẫu nhẹ và hữu ích Đặc biệt dành cho cây tóc và các biện pháp can thiệp y tế thẩm mỹ tương tự.



KÍNH VÒNG

LUP-06

Loại đầu có 4 thấu kính phóng đại dự phòng + Băng đô có thể điều chỉnh Khớp di chuyển Kính vòng có thể điều chỉnh.





KÍNH VÒNG

LUP-07



Chiếu sáng tốt hơn nhiều với tính năng đèn LED kép * 5 ống kính dự phòng với các tính năng phóng đại khác nhau.
 * Kích thước ống kính 1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X * Thiết kế công thái học trang nhã không gây khó chịu cho đầu.
 * Sản xuất đặc biệt từ vật liệu carbon titan chống dị ứng chất lượng hạng nhất.
 Bút được cấp nguồn bằng 3 pin.

Kích thước hộp: 24 x 20 x 7 cm 380 Gr

KÍNH VÒNG

LUP-08

Chiếu sáng tốt hơn nhiều với tính năng LED * 5 ống kính dự phòng với các tính năng phóng đại khác nhau.

* Kích thước ống kính 1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X * Thiết kế công thái học trang nhã không gây khó chịu cho đầu.

* Sản xuất đặc biệt từ vật liệu carbon titan chống dị ứng chất lượng hạng nhất.


Đây là mẫu nhẹ nhất



GÖZLÜK TİP LED IŞIKLI BÜYÜTEÇ 8X / 15X VE 23 X



SÖKÜLEBİLİR
LENS İLE FARKLI
BÜYÜTME
SAGLANIR

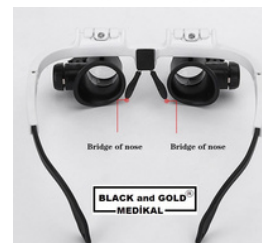


KÍNH VÒNG

LUP-09

Loại đầu có 4 thấu kính phóng đại dự phòng + Băng đô có thể điều chỉnh Khớp di chuyển Đèn có thể điều chỉnh

- Độ phóng đại 10 lần
- Độ phóng đại 15 lần
- Độ phóng đại 20 lần
- Độ phóng đại 25 lần

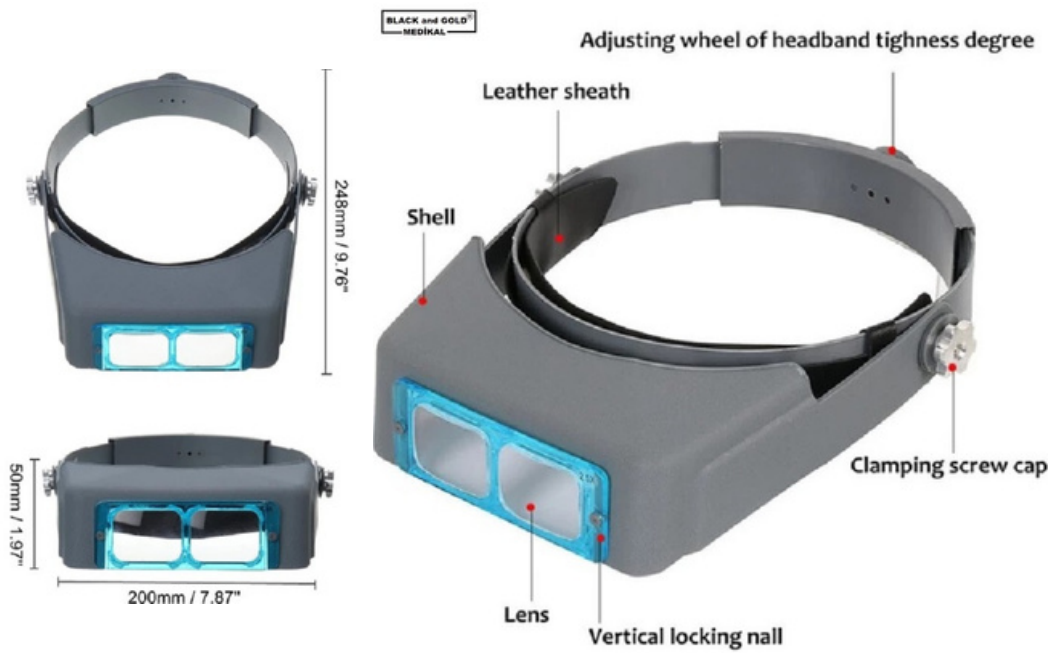

TỐI ƯU HÓA

OPTVZR-01

Kính lúp loại chuyên nghiệp Optivisor Blue với 5 ống kính dự phòng



Magnifier
1.5X, 2.0X,
2.5X, 3.5X

Đèn LED có thể lấy nét chạy bằng pin

MÃ SỐ : BTRYL.01

ĐÈN LED CẮY TÓC CÓ THỂ SẠC LẠI, TẬP TRUNG

- Nó có thiết kế tiện dụng và phong cách
- Nó nhẹ và không làm nặng đầu
- LED có thể điều chỉnh và di chuyển
- Nó có pin lithium và có thể được sử dụng bằng cách sạc.
- Cung cấp trung bình 4-5 giờ sử dụng với một lần sạc
- Giải quyết vấn đề mất điện
- Đèn LED mang lại khả năng hiển thị chuyên nghiệp tuyệt vời



KÍNH

KGZLK-01

Kính tái sử dụng bảo vệ Có thể được khử trùng. Nó phù hợp để tái sử dụng. Nó có bảo vệ bên. Có thể điều chỉnh tai.



KÍNH VÒNG CHUYÊN NGHIỆP

PRF.LP.01

Kính vòng chuyên nghiệp
Tùy chọn màu xanh và đỏ Có sẵn
Kích thước tai có thể điều chỉnh
Kính phẫu thuật có thể điều chỉnh
Quy trình cấy tóc, phẫu thuật nha khoa

ÁNH SÁNG: LED CHALIMA ALANI:
20-60 CM
ĐỘ PHÓNG ĐẠI 3,5 - 400X





KÍNH VÒNG CHUYÊN NGHIỆP

PRF.LP.02

Kính vòng chuyên nghiệp Đèn LED chuyên nghiệp chạy bằng pin Đèn xanh và đỏ Tùy chọn có sẵn Kích thước tai có thể điều chỉnh Kính phẫu thuật có thể điều chỉnh Quy trình cấy tóc, phẫu thuật nha khoa

ÁNH SÁNG: LED CHALIMA ALANI: 20-60 CM ĐỘ PHÓNG ĐẠI 3,5 - 400X





KÍNH VÒNG CHUYÊN NGHIỆP

PRF.LP.03

Loại ánh sáng; dẫn đến Cường độ sáng; Pin 60.000Lx; 2 tỷ lệ phóng đại vòng lặp; Nhiệt độ màu 2x-3x-4x; Tuổi thọ bóng đèn 5.500K; 50.000h Thời gian làm việc; Trọng lượng 4h; 280gr

KÍNH VÒNG CHUYÊN NGHIỆP

PRF.LP.04

Loại ánh sáng; dẫn đến Cường độ sáng; Pin 60.000Lx; Tỷ lệ phóng đại 1 vòng; Nhiệt độ màu 2x-3x-4x; Tuổi thọ bóng đèn 5.500K; 50.000h Thời gian làm việc; Trọng lượng 4h; 290gr



KÍNH VÒNG CHUYÊN NGHIỆP

PRF.LP.05

Loại ánh sáng; dẫn đến Cường độ sáng; Pin 60.000Lx; Tỷ lệ phóng đại 1 vòng; Nhiệt độ màu 2x-3x-4x; Tuổi thọ bóng đèn 5.500K; 50.000h Thời gian làm việc; Trọng lượng 4h; 290gr Bảng đồ hình bán nguyệt có thể điều chỉnh





DERMO LÁZER.01



Thiết bị Laser Hair 650 Nm Footed Hair Dermo Laser Thiết bị Xuất xứ: Ý GS1+ISO+CE+EC+EU Tuân thủ + Đã được phê duyệt lâm sàng

- Laser tóc kích thích lưu thông máu.
- Laser tóc mao mạch hỗ trợ hiệu quả khu vực bằng cách tăng lưu thông mao mạch
- Laser tóc kích thích và phục hồi nang tóc
- Laser tóc kích thích và kích hoạt các yếu tố tăng trưởng
- Laser tóc làm tăng quá trình oxy hóa bề mặt bằng cách tăng khả năng giữ oxy trong khu vực.
- Laser tóc hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ tế bào nang sang tế bào khác bằng cách mở lỗ chân lông (giãn nở) và hỗ trợ duy trì oxy.

Đơn vị Laser tóc

Được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ. Phương pháp điều trị rụng tóc. Sau khi cấy tóc;

- Nó tăng tốc độ chữa bệnh
- Tăng tỷ lệ sống sót của mảnh ghép
- Đẩy nhanh quá trình xuất hiện nang tóc mới
- Nó vượt qua giai đoạn giảm sóc mà không bị rơi.
- Triệu chứng rụng tóc kiểu nam được áp dụng ở phụ nữ
- Những cú sốc ngăn chặn tình trạng rụng tóc do căng thẳng



Hair Dermo Giải trí

Dưới sự kiểm soát và khuyến nghị của bác sĩ;
Thường là 2 sen mỗi tuần
Nên điều trị từ 6 - 8 tuần.
Nó được tính phí cho mỗi phiên.
Mỗi buổi là 15 phút. Thời lượng Senas có thể được chọn trên thiết bị.
5 Thân chính bao gồm một cái đầu.
Nó che phủ hoàn toàn đầu.
Có 250 đèn LED Medical 710 Nmlazer





HAIR LINE DESIGNER LAZER

MA SỐ: HÇL.01

ĐÁNH DẤU VÀ VẼ LASER

- Thân thép y tế 100%
- Pin Litium (khoảng 3 tháng sử dụng với một lần sạc)
- Kết nối sạc đa năng (có thể sạc ngay cả với điện thoại di động)
- Laser y tế được đính kèm

Sử dụng:


Nó được sử dụng để trình bày thẩm mỹ và xác định đường giữa giải phẫu của vùng trán.

Nó có thể được sạc trên bất kỳ bộ sạc nào bằng cáp sạc USB đi kèm. Cung cấp ánh sáng và sử dụng tiện dụng.

Thanh điều chỉnh ở vùng đánh dấu trán có thể mở rộng hoặc thu gọn.



Nên tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài với mắt.

Nó nên được làm sạch với sự giúp đỡ của một miếng vải ẩm sạch. Không có hại trong việc lau nó bằng chất khử trùng.

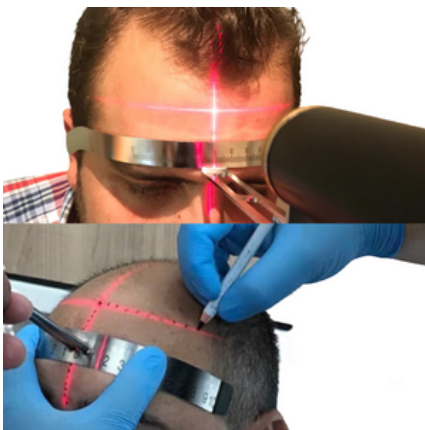



NECROSIS LOTION BỘ CẤP CỨU

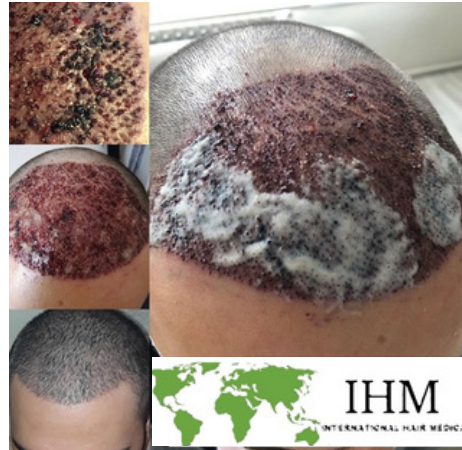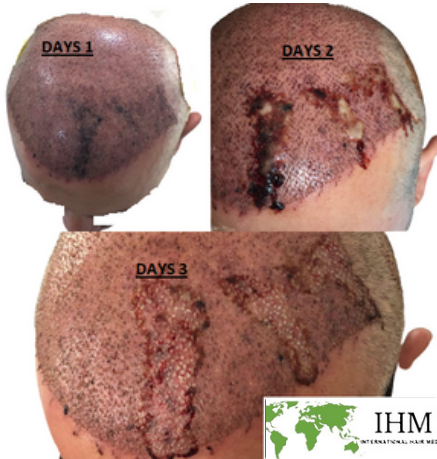

BỘ CẤP CỨU

Kem dưỡng da hoại tử - Kem dưỡng da hoại tử hc hair charm lâm sàng sửa chữa Kem dưỡng da hoại tử đen và vàng Nó có trong ống 125 ml.

Cách sử dụng: Nó được áp dụng cho các mô nghi ngờ, bị nhiễm trùng hoặc hoại tử. (Nó phải được làm sạch và lau khô trước) Nó được đưa vào bằng cách sờ nắn bằng đầu ngón tay mà không cần ấn.

Nó được để lại như vậy. Vì nó hòa tan với nước nên việc giặt bình thường được thực hiện vào ngày hôm sau (sau 24 giờ).

Cải thiện rõ ràng sẽ được chú ý sau khi rửa. Trong những trường hợp nặng như hoại tử sâu, hoại tử nhiễm trùng hoặc hoại tử phát hiện muộn thì nên tiếp tục điều trị như vậy trong tối đa 1 tuần. Với những trường hợp nghi ngờ hoặc mới hình thành, phát hiện ngay sẽ cho kết quả 99,9% ngay buổi đầu tiên. Và không có mất mát ghép.

- Nó có tác dụng sát trên mô và kéo sự tuần hoàn đi lên cùng với các tế bào.
- Có tác dụng tăng cường tuần hoàn
- Cung cấp khả năng giữ oxy cao
- Giữ ẩm liên tục
- Bảo vệ tính toàn vẹn của tế bào và giúp sửa chữa các mô bị hư hỏng
- Nó chứa nội dung nhằm ngăn ngừa lây nhiễm và giải quyết tình trạng lây nhiễm hiện có.
- Nó không gây dị ứng với công thức đặc biệt và là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực này.
- Cảnh báo: Sẽ có những vết rỉ máu nhỏ ở khu vực này 4 - 6 giờ sau khi bôi. (Điều này là do nó tăng cường lưu thông và phục hồi vùng hoại tử)
- Sẽ có hiện tượng tương tự như chất dịch màu vàng ở vùng bôi thuốc. (Máy hút bụi loại bỏ hoại tử và các mô chết, nhiễm trùng, bắn ở đó bằng cách gây nôn)
- Không có tình trạng mất mảnh ghép trong những trường hợp mới được phát hiện, nhưng có thể thấy một số mảnh ghép bị mất (tùy theo vùng) trong hoại tử giai đoạn cuối hoặc hoại tử xuống màng xương.
- Không nên áp dụng phương pháp điều trị nào khác trong khi sử dụng các phiên ứng dụng này.



Dòng tiêu chuẩn 1

- Với đèn LED - 30000 LUX
- Điều chỉnh ánh sáng 3 giai đoạn
- Màn hình cảm ứng
- Điều chỉnh chiều cao và hướng
- led hoạt động - đèn can thiệp
- Quy trình thẩm mỹ da
- Quy trình chăm sóc da
- Thủ tục y tế
- Ca phẫu thuật
- Đèn can thiệp di động có bánh xe đa chức năng được ưa chuộng ở các khu vực cấy tóc

ĐÈN CAN THIỆP CÓ VÒNG CÓ CHÂN

MUD.L.02

- VÒNG TUYỆT VỜI
- 90 ĐÈN LED TRẮNG
- ÁNH SÁNG 35000 LUX
- KHU VỰC LÀM VIỆC TỪ 20-60 CM
- TIÊU CHUẨN VỚI BÁNH XE
- CHÂN VÀ CƠ THỂ CÓ THỂ THÁO RỜI
- CÓ THỂ LÀM 360 ĐỘ



ĐÚC CHÂN PRF VỚI 108 ĐÈN LED MUD.L.03

- Đèn cấy tóc Loop 108 đèn LED
- Model chống lật có chân gang
- Đây là loại đèn can thiệp có đầu lớn nhất.
- Tên sản phẩm: Đèn cấy tóc có đế bằng gang Led Loop 108 LED
- Mã sản phẩm: MDLD-02
- Kích thước: 35 -40 -96 + Chân gang 60 cm + BÁNH PHANH
- Tính năng: Chân gang chống nghiêng + Khớp di động 108 đèn LED
- ÁNH SÁNG 35000 LUX



Dòng đèn xoắn ốc

MUD.L.04

- Đèn can thiệp nhiều màu sắc có chân xoắn ốc và không có đầu
- Đèn LED 24 watt - Tuổi thọ LED 5.000 giờ - Khả năng di chuyển mọi hướng nhờ đường xoắn ốc linh hoạt - Bánh xe di động - Sơn tĩnh điện
- Sản phẩm của chúng tôi; Phẫu thuật cấy tóc phù hợp với bệnh viện, phòng khám, trung tâm thẩm mỹ và mọi khu vực làm việc cần ánh sáng tập trung.
- 40000 Lux.
- Đen - Xanh - Trắng - Vàng - Xám

ĐÈN PHA CHÂN ABS CHUYÊN NGHIỆP

MUD.L.05

- Đèn kiểm tra phản xạ điểm chân nhựa ABS 50000 LUKS
- 1. Kết nối nguồn điện: 100-240 V AC, 50-60 HZ 0,65A
- 2. Công suất tiêu thụ: 10W
- 3. Cầu chì: F2AL250V
- 4. Đầu ra: 15V=0,65A
- 5. Nhiệt độ hoạt động: lên tới +5 / +40 C
- 6. Tuổi thọ bóng đèn: 10000 giờ
- Kích thước sản phẩm:
- Kích thước: 60 x 60 x 200 cm
- Trọng lượng: 5 Kg



ĐÈN LED CAN TÁC CHUYÊN NGHIỆP

MUD.L.06

- CÓ ĐÈN LED (LED VÀNG VÀ TRẮNG HỖN HỢP)
- NGĂN NGỪA PHẢN XẠ VÀ LÓT
- ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT SỐ, CÓ MÀN HÌNH HIỂN THỊ
- PHẦN ĐẦU CÓ THỂ DI CHUYỂN 360 ĐỘ
- PHẦN CỔ LÀ KHỚP DI ĐỘNG VÀ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH.
- MÔ HÌNH PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÓ BÁNH XE CẤU TRÚC CHÂN CÓ SẴN
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- mật độ 55.000 Lux
- Đường kính điểm 100-150 mm, Đường kính sâu 10 -25 cm, Nhiệt độ màu 3800 - 4800 K
- Chỉ số hoàn màu 91 Ra LED Tuổi thọ trung bình >50000 giờ
- Số lượng đèn LED 12 Đường kính đèn 150 mm Điều khiển cường độ 10~100 Cảm ứng kỹ thuật số
- Nguồn điện AC 220V/50Hz Công suất tiêu thụ 12 Watt






Đèn hoạt động can thiệp chuyên nghiệp Thụy Sĩ

MUD.L.07

Muayene Aydınlatma'da
Yeni Nesil LED Teknolojisi

YENİ
ÜRÜN

Derungs

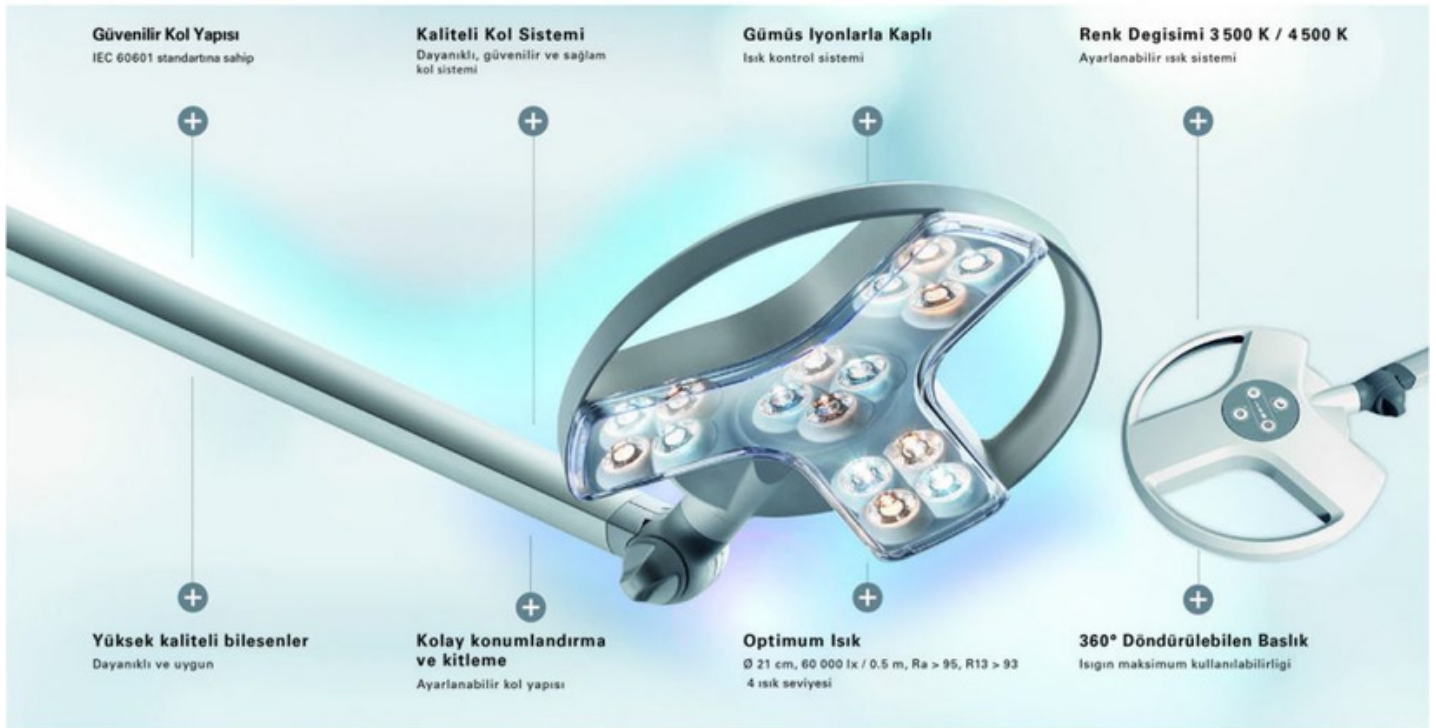

Kullanım Opsiyonları

tavana monte, tekerlekli ayak
raya monte, duvara monte
masaya monte



- muayene odası
- sac ekim odası
- acil servis

- yoğun bakım ünitesi
- neonatoloji
- jinekoloji

- pratisyen
- dermatolog
- kulak burun boğaz



reddot award 2014
winner

- Công nghệ LED
- Công suất chiếu sáng cao 60'000 lx/0,5 m
- Tuổi thọ đèn LED được đảm bảo là 60.000 giờ ở mức tối ưu.
- Diện tích chiếu sáng 210 mm
- Độ hoàn màu chính xác Ra > 95, R9 > 90
- Nhiệt độ màu (3500K và 4500K) cho phép hiển thị độ tương phản riêng lẻ. Cường độ chiếu sáng có 4 giai đoạn
- Chất lượng ánh sáng cao nhất nhờ quang học kim cương
- Chức năng vệ sinh kháng khuẩn trên các bộ phận quan trọng của đèn
- Bộ phận vận hành dễ dàng trên đầu
- Bán kính làm việc tối đa (đầu có thể xoay 360°)
- Công thái học tuyệt vời với hệ thống cánh tay bằng nhôm cân bằng lò xo
- Chi phí bảo trì tối thiểu nhờ công nghệ LED
- Tuân thủ các tiêu chuẩn EN 60601-1 và EN 60601-2-41
- Sản phẩm được phủ ion bạc. Trong vòng 8 giờ.
- Nó tự khử trùng.
- Có thể được gắn trên tường, gắn trên đường ray và
- Tùy chọn chân có bánh xe có sẵn.
- GẮN TƯỜNG
- Có sẵn tùy chọn GẮN TRẦN > (có tính phí)





Đèn hoạt động can thiệp chuyên nghiệp Đức

MUD.L.08



Mobil
Mobile

- **Thông số kỹ thuật của đèn phẫu thuật**
- Cường độ chiếu sáng trung tâm (EC): Để đảm bảo tầm nhìn tốt và tránh căng thẳng thị giác cho bác sĩ phẫu thuật, cường độ ánh sáng lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 40.000 đến 160.000 lux, ở giữa chùm sáng, cách nguồn sáng một mét.
- Nhiệt độ màu (K): Vì đèn phẫu thuật thường chiếu sáng các mô màu đỏ sẫm nên phải cung cấp ánh sáng đỏ nhìn thấy được để nhấn mạnh độ tương phản và sự khác biệt của mô. Nhiệt độ màu 4000K cung cấp đủ độ sáng và cho phép bác sĩ phẫu thuật phân biệt màu mô thực sự mà ít gây mỏi mắt nhất. Phạm vi chấp nhận được của đèn phẫu thuật phải nằm trong khoảng 3000 - 6700K.
- Độ sâu chiếu sáng (L1+L2): Khoảng cách giữa các điểm cường độ chiếu sáng 20% ở trên và dưới điểm trung tâm. Từ điểm được chiếu sáng tối đa, là tâm của trường ánh sáng cách bề mặt phát sáng 1 mét, quang kế được di chuyển về phía nguồn sáng cho đến khi cường độ ánh sáng đo được giảm xuống 20% giá trị cực đại. Khoảng cách giữa tâm và điểm này được xác định là L1. Khoảng cách đo tương tự từ ánh sáng là L2. Độ sâu chiếu sáng không cần lấy nét lại là tổng của hai khoảng cách L1 và L2. Trong phiên bản thứ hai của tiêu chuẩn IEC được xuất bản năm 2009, giá trị ngưỡng đã được sửa đổi từ 20% lên 60%. Trong thực tế, nó là một biểu thức được sử dụng để chụp ảnh tối ưu các vật thể nhỏ, độ tương phản thấp ở các độ sâu khác nhau trong các khoang cơ thể. Đầu đèn phẫu thuật với độ sâu trường ảnh lớn cung cấp vùng làm việc trên mức tiêu chuẩn mà không làm giảm vùng làm việc.
- Giá trị CRI Ra: Đèn phẫu thuật có giá trị CRI cao có nghĩa là màu sắc trông tự nhiên hơn. Phạm vi giá trị thay đổi từ 0 đến 100. Ánh sáng ban ngày được coi là 100. Giá trị CRI từ 85 và lớn hơn 85 cho thấy khả năng hiển thị màu tốt. Tóm lại, giá trị càng gần 100 thì ánh sáng thu được càng tự nhiên và chất lượng.
- Giá trị CRI R9:
- Phổ phản xạ là một giá trị đặc biệt liên quan đến các vật thể chứa bước sóng màu đỏ. Ánh sáng LED không thể đạt được hoàn toàn màu đỏ. Trong quá trình can thiệp phẫu thuật, nên sử dụng ánh sáng có giá trị R9 cao có thể hiển thị đầy đủ màu đỏ.
- Loại vật liệu: Loại vật liệu sử dụng cho đầu đèn phẫu thuật phải chọn loại vật liệu cứng có khả năng chịu được nhiệt độ, va đập và trầy xước.
- Đường kính vùng chiếu sáng (D10): Nó kết thúc khi đèn hoạt động đạt 10% cường độ ánh sáng. Rộng đề cập đến đường kính của điểm.
- Đo phân bố ánh sáng (D50): Nó kết thúc khi đèn hoạt động đạt 50% cường độ ánh sáng. Thu hẹp đề cập đến đường kính của điểm.
- Luồng không khí tầng: Luồng không khí tầng được cung cấp trong phòng mổ và các hoạt động phẫu thuật để ngăn chặn vi khuẩn, vi rút và vi trùng định cư trong khu vực phẫu thuật mở và gây nhiễm trùng. Sự nhiễu loạn của không khí không phải là tình huống mong muốn vì nó có thể khiến các hạt bị thổi không định hướng, có thể dẫn đến nhiễm trùng vùng phẫu thuật và vùng phẫu thuật phải được giữ vô trùng. Để giảm thiểu ô nhiễm trong đèn phòng mổ, nên sử dụng thiết kế đầu phẫu thuật tạo ra sự nhiễu loạn không khí.
- Vệ sinh: Cấu trúc cách nhiệt được gia cố và thân được phủ sơn chống vi khuẩn của đèn phòng mổ LED không được chứa bụi, chất bẩn và vi khuẩn bên trong thiết bị và phải phù hợp để làm sạch bằng các sản phẩm khử trùng.
- IP54: Đầu đèn phòng mổ phải có khả năng chống bụi và nước.
- Đèn phòng mổ có 3 loại sử dụng khác nhau: treo trần, treo tường và di động.
- TƯỜNG - Tùy chọn GẮN TRẦN (có tính phí)



SÚNG TRỊ LIỆU KỸ THUẬT SỐ

MÃ SỐ: MZTRP.01-EZ

- ĐẦU ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT SỐ
- TIP TIP NHIỀU KIM CÓ THỂ DÙNG MỘT LẦN
- TRỊ LIỆU TÓC
- PRP MẶT - CỔ - DOLLETE VÀ CƠ THỂ
- Sản xuất tại Hàn Quốc



Doz Ayarı Yapılabilir





SÚNG TRỊ LIỆU KỸ THUẬT SỐ

MZTRP.02-INSTADBEAUTY

- ĐẦU ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT SỐ
- BỘ ĐẦU KIM VÀ BỘ ĐẦU KIM DÙNG MỘT LẦN GÓI VÔ TRÙNG
- TRỊ LIỆU TÓC
- PRP MẶT - CỔ - DOLLETE VÀ CƠ THỂ
- Sản xuất tại Hàn Quốc

INSTATBEAUTY in MINUTES
NEEDLE-FREE MESOTHERAPY
■ MINI VANADIUM TITANIUM MESOTHERAPY GUN FOR MOISTURIZING ■

INSTATBEAUTY mezoterapi tabancası intradermal uygulamalar için geliştirilmiştir. Mezoterapi işlemlerinin güvenli, garantili ve konforlu uygulanmasına olanak sağlar.

Hava kompresörüyle çalışan mezoterapi tabancası **INSTATBEAUTY MESOGUN**; enjeksiyon derinliği, enjeksiyon modu ve her noktaya bırakılacak ürün miktarı için bar basıncının ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Dakikada seri 500 atış özelliği sayesinde oldukça hızlı enjeksiyona olanak verir. Manuel uygulamalarda yaşanan ağrı, acı riskini ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık iğne kiti ile kullanılan **INSTATBEAUTY MESOGUN**; ürün kaybını engeller. Kontrollü, rahat uygulama özelliği sayesinde hasta konforunu da sağlar.



DERİN TEMAS

Teknolojik Yapısı ile en derine temas ve ikmal imkanı.



Yaşlanma ile birlikte başlayan çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkin uygulama ve Anti-Aging Seansları

KIRISIKLIK UYGULAMALARI






GÖZENEK KÜÇÜLTME

Gözenek uygulamalarında ve yağlı ve yağlıya dönük cilt tiplerinde etkin sonuçları



Güneş Lekeleri
Cilt Lekeleri
Akne Lekeleri
Çil ve Yank İzleri
gibi leke sorunları ve cilt renk/ton dengesizlikleri için uygulamalar.

RENK/TON DENGESİZLİKLERİ CİLT LEKELERİ

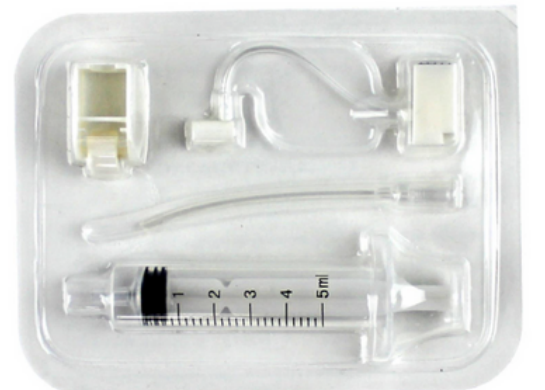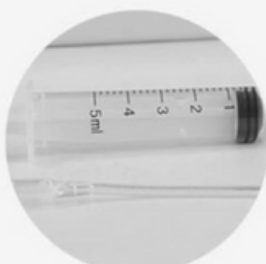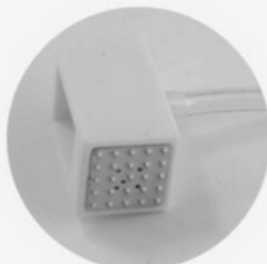



Máy Ly Tâm 6 Mắt

MÃ SỐ: SNRF.06

- THỜI GIAN 30 PHÚT
- 4000 vòng/phút
- Rìu NHỰA
- CHÂN CHÂN KHÔNG chống rung
- HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH
- TƯƠNG THÍCH VỚI A.S.M VÀ PRP
- 6 GZÖLÜDÜR

Kích thước hộp: 35 x35 x35 cm 4 Kg

Điện từ 8 mắt

MÃ SỐ: SNRFJ-E.M.08

- Özel platform üzerine oturtulan bakım gerektirmeyen indüksiyon motor sessiz ve titreşimsiz çalışır.
- Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi vardır. Kapak kapatılmadan cihaz çalıştırılmaz.
- Kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunmaktadır. Cihazlar Hız veya Savurma gücü girilerek çalıştırılabilir.
- Ayrıca kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterilir
- Tüpleri taşıyan 35° sabit açılı rotorlar polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
- Açılır başlıklı santrifüjlerde rotor malzemesi elektrostatik fırın boyalı alüminyumdur.
- Tüp yuvaları değiştirilerek çeşitli tüp hacimlerine uygun çalışma sağlanır.
- Medikal santrifüj cihazlarının dış gövdeleri çelik sacdan imal edilmiştir ve fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihazlar akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.



Ağırlık : 9 KG



Dijital Kontrol Paneli

- 0-99 dakika Arasında Ayarlanabilen Mekanik Zaman Ayarı
- Dijital Hız Kontrolü



8x 15ml Tüp Kapasiteli

Teknik özellikleri:

Tüp Kapasitesi	8x15ml
Rotor Tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız Kontrolü	PID Dijital Mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız,RCF ve Zaman Kontrolü
Max. Dönme Hızı	5000 rpm
Max. Savurma Gücü (RCF x g)	2515kg
Hız Ayarlama Adımı	10rpm
Hız Ayarlama Aralığı	500-5000rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan Hıza Ulaştığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli Çalışma Modu	Var
Savurma Gücü Girilerek Çalışma	Var
Kısa Süreli Çalışma	Pulse Tuşuyla
Program Sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam Güç	100 W
Emniyet Sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak Kilidi	Var
Harici Hız Okuma	Var
Döner Başlık Malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış Gövde Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240V / 50-60 Hz
Dış Ölçüler (g x y x d)	29x25x36 cm
Net Ağırlık	9 kg
Paketli Ağırlık	10 kg




GÓI ỐNG GEL PRP 50 CÁI



MÃ: PRP.T-J.50

CHỨA 50 ỐNG CHUẨN BỊ GEL PRP 10 ML Y TẾ

MÁU LẤY TỪ BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN SANG ỐNG CHÂN KHÔNG ĐẶC BIỆT CÓ GEL VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG SAU KHI LY TÂM TRONG THIẾT BỊ LY TÂM

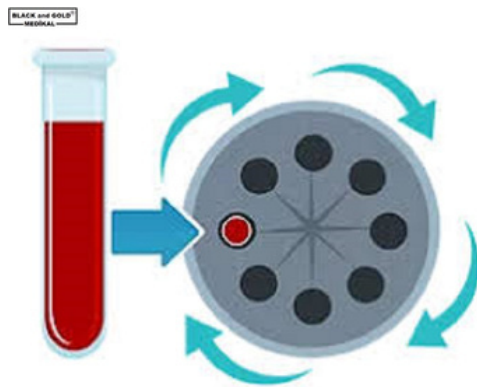


GÓI ỐNG PRP CITRATED 50 CÁI

PRP.T-S.50

CHỨA 50 ỐNG CHUẨN BỊ PRP CITRATED 10 ML Y TẾ

MÁU LẤY TỪ BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN SANG ỐNG CHÂN KHÔNG ĐẶC BIỆT CÓ GEL VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG SAU KHI LY TÂM TRONG THIẾT BỊ LY TÂM

BLOOD STRUCTURE

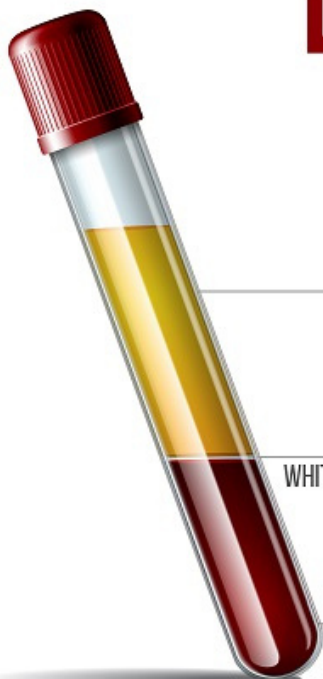

PLASMA



WHITE BLOOD CELLS AND PLATELETS



RED BLOOD CELLS





DERMOROLLE R MÃ: DRMRL-500.01

- ĐIỀU TRỊ TÓC
- TRỊ LIỆU TÓC
- TRỊ LIỆU MẶT
- ỨNG DỤNG CHĂM SÓC TÓC
- ỨNG DỤNG CHĂM SÓC MẶT
- ỨNG DỤNG CHĂM SÓC DA
- GÓI VỆ SINH CÁ NHÂN
- 500 KIM TITAN
- CHÍNH XÁC NÂNG CAO VAI TRÒ



CHAI VỆ SINH RỖNG CÓ NẮP CON LĂN

DRMRL-300.02

Mô tả Sản phẩm

Bộ nội dung: Con lăn Hydra, Chất lỏng làm sạch Dermalroller, Chất khử trùng da, Hướng dẫn sử dụng của Thổ Nhĩ Kỳ Con lăn Hydra: Đây là một công cụ lăn kim siêu nhỏ với 64 kim titan trên đầu con lăn.

Nó bao gồm 3 phần chính: đầu, ống và vỏ. Nhờ có vỏ bảo vệ, kim được giữ mà không bị hư hỏng.

Nó kích thích cơ chế chữa lành vết thương và đảm bảo sản xuất tổng hợp collagen mà không gây tổn hại cho da.

Nó tạo điều kiện cho sự hấp thụ các hoạt chất dưới da nhờ các kênh vi mô mà nó mở ra trong da.

Nó được sử dụng cho quầng thâm dưới mắt, nếp nhăn và đường nhăn, lỗ chân lông hở, mụn trứng cá và vết sẹo, nhược điểm trên da, rụng tóc, vết rạn da khi sinh, cellulite và nhiều vấn đề khác.

Quy trình được thực hiện bằng cách quét vùng ứng dụng theo hình ngôi sao (cộng chéo) 6-10 lần.

Tùy thuộc vào kích cỡ kim được sử dụng, ứng dụng được thực hiện trong 1 phiên cứ sau 2-5 ngày.

Con lăn Hydra nên được làm sạch bằng Dermalroller Cleaning Fluid trước và sau mỗi buổi trị liệu.

Kích thước kim lăn Hydra:

0,25mm - có thể sử dụng dưới và xung quanh mắt.

0,50mm - có thể sử dụng trên mặt hoặc trên tóc.

1,00mm - có thể sử dụng trên vùng cơ thể hoặc trên tóc.

Khoảng thời gian của phiên lăn Hydra:

0,25mm - Có thể bôi 1 buổi cách 2 ngày.

0,50mm - có thể bôi 1 đợt trong 3 ngày.

1,00mm - có thể áp dụng 1 đợt trong 5 ngày.



CHAI DUNG DỊCH THUỐC RỖNG

64 VỎ CON LĂN KIM TITAN

LỚP BẢO VỆ



Cây ghép tóc và GHẾ THẨM MỸ Y TẾ

KOD: KLTK.3M-01

- GHẾ ĐIỀU HÀNH LUX SERIES 3 ĐỘNG CƠ
- THÉP CẮT LASER THI CÔNG
- KHÔNG LẮC
- 32 DENSITY SERIES ĐẶC BIỆT COMFORT
- VẢI DA VINLEX SERIES AŞAN VIVA
- ĐẦU ĐỤC (VÀ GỐI ĐÓNG)
- ĐÓ LÀ KHÁNG KHUẨN
- MÀU SẮC LÀ TÙY CHỌN

LƯU Ý: Ghế đầu xử lý chuyên nghiệp cùng màu tùy chọn và xe đẩy làm việc được sản xuất.

KÍCH THƯỚC: 185 X 61 X 60 CM NET: 93 KG





CHỈNH HÌNH PHÂN CÔNG VẬN HÀNH CHUYÊN GIA

KOD: FBR.01

- Thủ tục chỉnh hình phân có tựa lưng
- Nó có bộ giảm xóc và tăng giảm.
- Nó có chân mạ crôm
- Hệ thống bánh xe phanh có sẵn
- Nó có tựa lưng
- Thích hợp sử dụng lâu dài, tiện dụng
- Nó rất thuận tiện để sử dụng
- Tùy chọn màu sắc có sẵn.

KÍCH THƯỚC: 40 X 40 X 50 CM NET: 9 KG





ĐỆ THỦ TỤC CÓ LƯNG

KOD: TBR.02

- Thủ tục chỉnh hình phân có tựa lưng
- Nó có bộ giảm xóc và tăng giảm.
- Nó có chân mạ crôm
- Hệ thống bánh xe phanh có sẵn
- Nó có tựa lưng
- Nó phù hợp để sử dụng lâu dài,
- Nó rất thuận tiện để sử dụng
- Tùy chọn màu sắc có sẵn.

KÍCH THƯỚC: 35 X 40 X 40 CM

NET: 8 kg

NẾU ĐƯỜNG PHÂN SERIES

KOD: TBR.03

- Thủ tục chỉnh hình phân
- Nó có bộ giảm xóc và tăng giảm.
- Nó có chân mạ crôm
- Hệ thống bánh xe phanh có sẵn
- Nó có tựa lưng
- Nó phù hợp để sử dụng lâu dài,
- NÓ LÀ MỘT SERIES ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HÌNH DÁNG, NÓ CẢM HÔNG VÀ XÓA CẢM GIÁC MỆT MỎI VÀ NGÀY NGỦ.

- Tùy chọn màu sắc CHỈ CÓ ĐEN

KÍCH THƯỚC: 40 X 40 X 40 CM NET: 7 KG



ĐÔI KHÔNG HƯỚNG DẪN

KOD: TBR.04

- Thủ tục chỉnh hình phân
- Nó có bộ giảm xóc và tăng giảm.
- Nó có chân mạ crôm
- Hệ thống bánh xe phanh có sẵn
- Nó có tựa lưng
- Nó phù hợp để sử dụng lâu dài,
- LÀ MÔ HÌNH KHÔNG CÓ BỀ MẶT
- Tùy chọn màu sắc CÓ SẴN

KÍCH THƯỚC: 40 X 35 X 38 CM NET: 5,5 KG





GHẾ LẤY MÁU LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

MÃ: ERP.E.220-B

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- sàn kháng khuẩn
- Tính năng Trendelenburg
- Tựa đầu và tay vịn có thể di chuyển
- Chuyển động đồng thời của lưng và chân
- tay kiểm soát
- Diện tích chỗ ngồi: 60 x 50 cm
- 28 mật độ 5 cm miếng bọt biển màu xám
- Kích thước : 80 x 175 x 48 cm
- Trọng lượng: 40Kg

TỦ THUỐC ĐẶC BIỆT KHÓA

MÃ: ERP.E-112

- Tủ ma túy
- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- mũ xanh đỏ
- Dkp đằng sau
- Vỏ có thể khóa
- Kích thước : 18 x 60 x 50 cm
- Trọng lượng: 9Kg



KHÁM NGHỈ CÁNG

KOD: TBR.04

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- sàn kháng khuẩn
- Chuyển động đầu và chân bằng piston khí
- chân vững vàng
- Chiều dài sofa khi khép chân: 145 cm
- Chiều dài phần đầu: 40 cm
- Chiều dài phần ngồi: 100 cm
- chiều dài phần chân: 40 cm
- Kích thước : 56 x 185 x 70 cm
- Trọng lượng: 22Kg



MÔ HÌNH MAYO MASASI HİDROLİKLİ

KOD :MM.H.01

- thép không gỉ chất lượng 304
- Ba bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Điều chỉnh độ cao bằng bàn đạp chân thủy lực
- Bàn trên xoay 360 độ
- Nó là một sản phẩm y tế
- Trọng lượng: 22 Kg Đóng gói: 25 Kg



BAN NÚT HƯỚNG DẪN MASSAGE MAY

KOD :MM.H.02

- thép không gỉ chất lượng 304
- Ba bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Điều chỉnh độ cao bằng tay
- Bàn trên xoay 360 độ
- Nó là một sản phẩm y tế
- Trọng lượng: 17 Kg Đóng gói: 20 Kg



HƯỚNG DẪN MASSAGE SÔNG TIBBİ

KOD :MM.H.03

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Ba bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Tấm trên bằng thép không gỉ chất lượng 304
- Điều chỉnh độ cao bằng tay
- Diện tích sử dụng bên trong bàn: 57x38 cm

KÍCH THƯỚC: 60X40X70 CM 18 KG





BÀN BỆNH NHÂN

MÃ SỐ : ERP.E-273.A

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Tấm trên cùng kháng khuẩn ABS
- Chuyển động có giảm chấn

Kích thước: 40 x 80 x 80-100 cm Trọng lượng: 10 Kg



BÀN BỆNH NHÂN

MÃ SỐ : ERP.E-273

Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn ABS chống tĩnh điện Bốn bánh xe, hai bánh có phanh Mặt bàn bằng gỗ Di chuyển có giảm xóc Kích thước: 40 x 80 x 80-100 cm Trọng lượng: 10 Kg

TỦ TÍCH CỰC

MÃ: ERP-271-A

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Tấm trên cùng bằng nhựa ABS, thân bằng kim loại tấm
- Ngăn kéo và tủ

Kích thước : 37 x 44 x 80 cm

Trọng lượng: 15Kg





xe đẩy thay quần áo

MÃ: ERP.E251

- 1 Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
 - Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
 - cơ thể kim loại
 - Bồn tắm 29x24 cm, bồn tắm 40 cm, chậu 20 cm
 - đẩy tay cầm
- Kích thước: 36 x 87 x 82 cm
Trọng lượng: 10 Kg



XE ĐƠN VẬT LIỆU VÀ THUỐC

MÃ: ERP.E-257

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn trên thân kim loại tấm
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Mặt trên kháng khuẩn ABS
- Người giữ tập tin và thùng rác
- 32 hộp thuốc trong suốt kháng khuẩn
- Hai ngăn kéo
- đẩy tay cầm
- Kích thước : 50 x 90 x 110 cm
- Cân nặng: 47Kg



GIỎ HÀNG THIẾT BỊ CÓ HUYỀN DỊCH SERUM

KOD: ERP.E-233A

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- cơ thể kim loại
- Với ngăn kéo và móc treo
- Độ sâu ngăn kéo: 11 cm
- Kích thước : 40 x 50 x 82 cm
- Trọng lượng: 10Kg





GHẾ RỬA SANG TRỌNG



MÃ SỐ: Y-KLTK.01

- GHẾ GIẶT DÒNG LUX
- NÓ LÀ TIỆN DỤNG VÀ THOẢI MÁI
- BAO GỒM BỘ RỬA + MÁY TRỘN
- CHỈ CÓ KẾT NỐI NƯỚC VÀ KẾT NỐI THOÁT NƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP.

KÍCH THƯỚC : 140X65X65 CM

- 45 KG



GHẾ GIẶT

MÃ SỐ: Y-KLTK.02

- TIÊU CHUẨN GIẶT GHẾ
- NÓ LÀ TIỆN DỤNG VÀ THOẢI MÁI
- BAO GỒM BỘ RỬA + MÁY TRỘN
- CHỈ CÓ KẾT NỐI NƯỚC VÀ KẾT NỐI THOÁT NƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP.



GHẾ GIẶT DI ĐỘNG

MÃ SỐ: Y-KLTK.03

- GHẾ GIẶT DI ĐỘNG
- VÒI THOÁT NƯỚC ĐƯỢC VẶT VÀO CỐNG NƯỚC HOẶC BỒN BỒN
- TRONG PHÒNG TẮM HOẶC PHÒNG PHÙ HỢP, ỐNG XẢ CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN SANG XÔ HOẶC KHU VỰC TƯƠNG TỰ.
- NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC MANG THEO VÀ SỬ DỤNG BẤT CỨ NƠI NÀO NHƯ DI ĐỘNG

KÍCH THƯỚC: 100-160 CM 20 KG





BÀN HOẠT ĐỘNG Z CÓ MẪU NGĂN KÉO

MÃ SỐ: Z.SHP-01

- Mô hình ngăn kéo bảng Z
- Kích thước: 40 x 65 x 71 cm
- Trọng lượng: 15 kg
- 2 kệ và ngăn kéo
- Đó là một mô hình y tế có bánh xe.
- BÁNH XE CÓ PHANH
- SƠN TĨNH ANODISED Y TẾ

BẢNG HOẠT ĐỘNG MODEL Z CÓ 2 KỆ

MÃ SỐ: Z.SHP-02

- Mô hình trạm vận hành Z
- Kích thước: 40 x 65 x 71 cm
- Trọng lượng: 12 kg
- 2 kệ
- Đó là một mô hình y tế có bánh xe.
- BÁNH XE CÓ PHANH
- SƠN TĨNH ANODISED Y TẾ



BẢNG HOẠT ĐỘNG MODEL Z CÓ 3 KỆ

MÃ SỐ: Z.SHP-03

- Mô hình trạm vận hành Z
- Kích thước: 40 x 65 x 71 cm
- Trọng lượng: 12 kg
- 2 kệ
- Đó là một mô hình y tế có bánh xe.
- BÁNH XE CÓ PHANH
- SƠN TĨNH ANODISED Y TẾ



SERUM ASKISI AHTAPOT AYAKLI

MÃ: ERP.E288

- Sơn bột thô tĩnh điện màu bạc kháng khuẩn
- Năm bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Phần móc treo mạ niken
- với bốn móc
- có chân bằng gang

Kích thước: 60 x 60 x 130-220cm

Trọng lượng: 9 Kg

SERUM ASKISI MẪU TIÊU CHUẨN

MÃ: ERP.E287

- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Phần móc treo mạ niken

Kích thước: 50 x 50 x 105-187cm

Trọng lượng: 3 Kg



IV MẪU ĐA CHUYÊN NGHIỆP POSE

MÃ: ERP.E-289.B

- Thân bằng thép không gỉ chất lượng 304
- Năm bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- Bốn móc treo
- Mang theo bơm truyền dịch phù hợp
- Mạ niken năm feet

Kích thước : 60 x 60 x 115-210cm

Trọng lượng: 6Kg





Hastabaşı Monitör Şehpası ZRV-097

- Krom Nikel Kaplama Gövde
- Alüminyum Cihaz Sabitleme Tablası
- Paslanmaz Aksesuar Sepeti
- 2'si Frenli 4 Tekerlek



THIẾT BỊ THEO DÕI GIỎ HÀNG Y TẾ

KOD: C.ARB-01

- Giá đỡ màn hình di động
- Thân mạ Chrome Niken
- Bàn cố định thiết bị nhôm
- Giỏ phụ kiện không gỉ
- 4 bánh, 2 có phanh

KÍCH THƯỚC: 140 X 50 X 40 10 KG

MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHUYÊN NGHIỆP

KOD: C.ARB-02

- SERIES CHỨNG MINH XE XỬ LÝ THIẾT BỊ Y TẾ
- Sơn bột tĩnh điện kháng khuẩn
- Bốn bánh xe chống tĩnh điện ABS, hai bánh có phanh
- KHU SỬ DỤNG 3 TẦNG
- BẢNG KAYDIRMAZ
- **Ổ CẮM ĐIỆN 3 ĐIỆN TRÊN THIẾT BỊ**
- TAY CẦM KÉO

Kích thước: 80 x 40 x 40 Trọng lượng:

8 Kg



MẪU NGĂN KÉO THIẾT BỊ XE ĐẨY THIẾT BỊ

KOD: C.ARB-03

- Thép không gỉ
- Thân mạ Chrome Niken
- 2 Kệ + Ngăn Kéo
- 4 bánh, 2 có phanh
- Dòng phòng mổ y tế

KÍCH THƯỚC: 60 X 50 X 65 28 KG



MÁY Tiệt trùng ETUV 50 LÍT

KOD: ETV.50

- Thiết Bị Tiệt Trùng Dry Air 50LT Digital
- Nhiệt độ: 20C - 250C
- Độ nhạy: +- 2%
- Điện trở: 600 W + Âm lượng bên trong: 50LT
- Kích thước bên trong:
- Chiều rộng: 40cm - Chiều cao: 40cm
- Độ sâu: 32cm


Nó có công dụng đa năng
Nó có thể được sử dụng trong Phòng khám Cây tóc, nha sĩ và các hoạt động tiểu phẫu.

Tiệt trùng lò nướng 10 lít

KOD: ETV.10

- Thiết Bị Tiệt Trùng Dry Air 10 LT Digital
- Nhiệt độ: 20C - 250C
- Độ nhạy: +- 2%
- Điện trở: 600 W + Âm lượng bên trong: 50LT
- Kích thước bên trong:
- Chiều rộng: 30cm - Chiều cao: 30cm
- Độ sâu: 24cm

Nó có công dụng đa năng
Nó có thể được sử dụng trong Phòng khám Cây tóc, nha sĩ và các hoạt động tiểu phẫu.

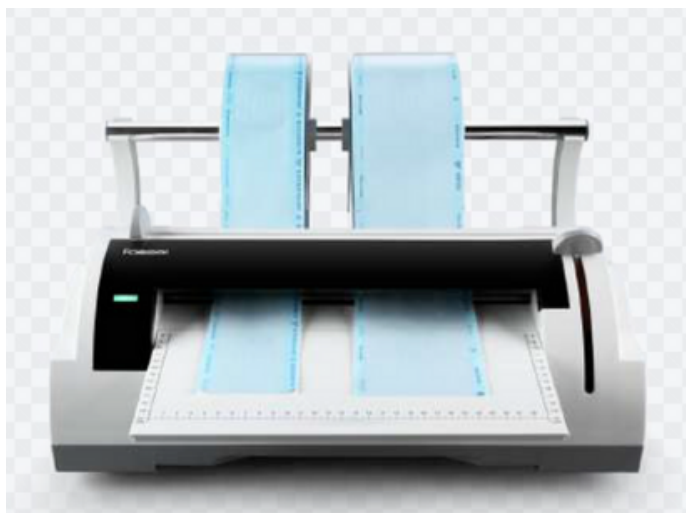

THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI VÔ TRÙNG

MÃ SỐ: PK.01

- Dữ liệu kỹ thuật của thiết bị đóng cuộn tiệt trùng:
- - Điện áp 230V/50Hz
- - Công suất 500W
- - Chiều rộng đóng tối đa 250 mm
- - Chiều rộng mỗi hàn 12 mm
- - Trọng lượng của thiết bị là 5 kg



THIẾT BỊ PHÁT HỦI SIÊU ÂM 8 LÍT

MÃ: **ULTRSN-8**

- Máy làm sạch siêu âm kỹ thuật số
 - Giỏ dây 8 Lt có vòi xả nước
 - Các chế độ sử dụng khác nhau + Hoạt động ít tiếng ồn
 - Dễ dàng vệ sinh
 - **NÓ CÓ MỘT VÒI VÀ CUNG CẤP THOÁT NƯỚC DỄ DÀNG.**
 - Thiết bị làm sạch siêu âm khử trùng
 - Làm sạch tất cả các sản phẩm của bạn bằng sóng rung siêu âm.
- Bằng cách rửa nó, bạn có thể bảo vệ nó khỏi bị ăn mòn và mài mòn, đồng thời đảm bảo làm sạch chi tiết.

THIẾT BỊ PHÁ HỦI SIÊU ÂM KỸ THUẬT SỐ 700 MI

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Açıklaması	Dijital Ultrasonik Temizleyici
Modeli:	CD-7940
Tank Kapasitesi	750 ml ±10% / 0.79 qt (ABD) Maks. 600 ml ±10% / 0.63 qt (ABD)
Tank Boyutları	14.9x12.7x4.6 cm / 5.9"x5.0"x1.8"
Güç Kaynağı	CD-7940: AC100V~ 50/60Hz, 26W AC100-120V~ 60Hz, 35W AC220-240V~ 50Hz, 50W
Dijital Zamanlayıcı Ayarları	(3dk) (5dk) (8dk) (1,5dk) (10dk) →180s → 300s → 480s → 90s → 600s
Ultrasonik Frekansı	CD-7940: 42 KHz ±10%
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik SUS304
Gövde Malzemesi	ABS
Güç Kablo Uzunluğu (Yaklaşık)	1.5 m
Net Ağırlık	1.1 kg / 2.4 lb
Brüt Ağırlık	1.5 kg / 3.3 lb
Cihaz Boyutları	19.5x19.5x17.8 cm / 7.7"x7.7"x7.0"
İç Karton Boyutları	24.2x24.2x21.2 cm / 9.5"x9.5"x8.3"
Master Karton Başına Miktar	6 adet/karton
Master Karton Boyutları	75.0x26.0x45.0 cm/29.5"x10.2"x17.7"
Aksesuarlar	1 adet plastik sepet, 1 adet saat standı, 1 adet CD standı

MÃ: **ULTRSN-700**



Tiệt trùng VIÊN FORMALDEHYDE 800 CÁI

MÃ: **FRM.800**



- Nó được trình bày dưới dạng 800 miếng bảo vệ bằng nhựa.
- Quy trình khử trùng và khử trùng phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền.
- Nó được sử dụng theo đúng quy trình và hướng dẫn.
- Viên formaldehyde đựng trong hộp kín
- Những công cụ có kích thước nhỏ có thể được tạo ra bằng cách vứt đi một vài mảnh.
- Nó được sử dụng trong khử trùng.
- Tên sản phẩm: Viên Formaldehyde 800
- Kích thước: 24 x 15 x 14 cm 1 Kg
- Tính năng: Máy tính bằng đồng ngay trong hộp nhựa có khóa
- Nơi sản xuất: Türkiye



THUỐC TRỒNG

MÃ: TRM.24

- TRỒNG Y TẾ 24 LUKE
- MÁY NÉN KHÍ VÔ TRÙNG
- Dụng cụ cầm tay vô trùng
- TÚI KHÍ VÔ TRÙNG
- tĩnh mạch vô trùng

Nó đảm bảo rằng các sản phẩm như sản phẩm vẫn được vô trùng. Kích thước: 24 x24 x 24 3 Kg



KHAY Y TẾ CÓ NẮP 30 LUKS

MÃ: T.T.K-30

- THÉP KHÔNG GỈ Y TẾ
 - MẪU TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC A4
 - CÓ BÌA
- KÍCH THƯỚC: 30 X 22 X 6 Cm 0,750 Gr



BỘ Y TẾ 500 MI

KOD : T.T.T-500

- THÉP KHÔNG GỈ Y TẾ
- BÁT GIẢI PHÁP
- 400ML



BÔ Y TẾ 150 ML

MÃ: T.T.K-150

- THÉP KHÔNG GỈ Y TẾ
- BÁT GIẢI PHÁP
- 150ML

KÍNH Y TẾ 150 ML

KOD : T.T.T-150



- THÉP KHÔNG GỈ Y TẾ
- KÍNH GIẢI PHÁP
- 150ML




Y TẾ THẬN TAS 500 MI

MÃ SỐ: TBT-500

- THÉP KHÔNG GỈ Y TẾ
- DUNG DỊCH + BỘ PHẬN BỒN 400 ML

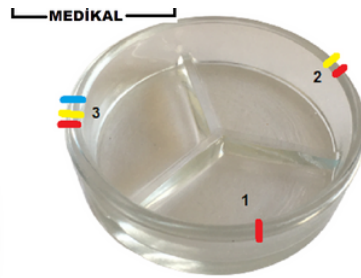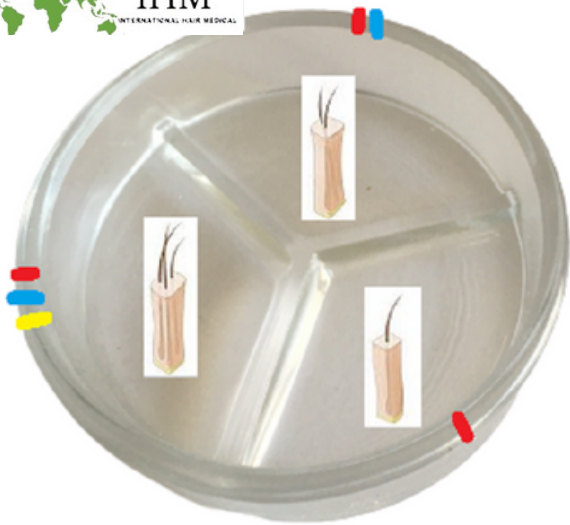

0,3 mm Kalınlık x 100 mm Çap

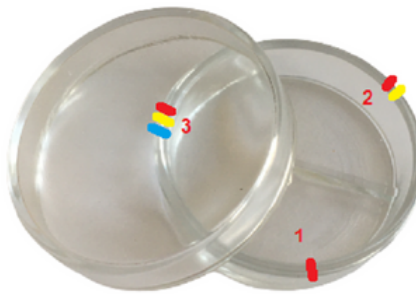

THỦY TINH 3 NGĂN PETRIE

KOD: CP-3X100

- 3 PHẦN
- MẪU CAM KALIN
- Đĩa ghép PETRI
- 100MM X 100MM

MÁY LÀM MÁT PETRI GRAFT


MÃ SỐ: PTR.SGTC-150



CAM PETRİ 100-120


MÃ SỐ: C.P-150

- TIIBİ 150 MM CAM PETRİ
- MÔ HÌNH BÌA
- 150X150ML

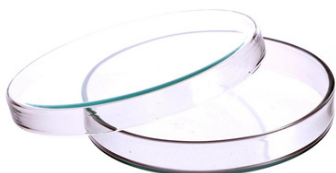


MÃ SỐ: C.P-120

- TIIBİ 120 MM CAM PETRİ
- MÔ HÌNH BÌA
- 120X120ML

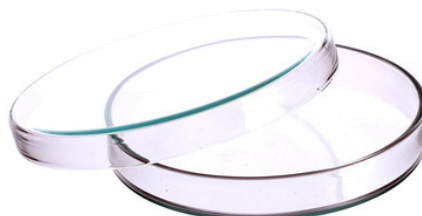

MÃ SỐ: C.P-100

- TIIBİ 100 MM CAM PETRİ
- MÔ HÌNH BÌA
- 100X100ML

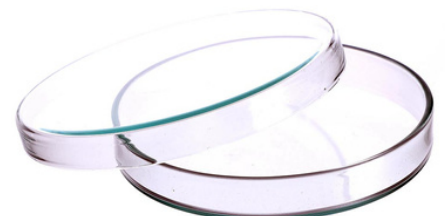



MÁY NỒI TẮM CASSETTE UV C

UVC - OTCLV-1


- Nồi hấp tiệt trùng UV C Cassette cầm tay CHỈ TRONG 3 PHÚT
- NÓ CUNG CẤP KHẢ NĂNG SẠC NGAY BẰNG ĐIỆN THOẠI, NHỜ BỘ CHUYỂN ĐỔI SẠC ĐA NĂNG.
- NÓ CHO PHÉP BẠN CUNG CẤP Tiệt trùng TẤT CẢ SẢN PHẨM CỦA BẠN BẰNG NHỰA - KIM LOẠI - ĐỘNG CƠ MICRO - FUE PUNCH - SAPPHIRE BLADE, v.v. CHỈ TRONG 3 PHÚT.
- Nồi hấp cấy tóc di động được CE / FDA - ROSH phê duyệt.
- Bước sóng tia cực tím: 253,7 Nm
- Phương pháp làm việc; Nó tương thích với tất cả các bộ sạc điện thoại và bạn cũng có thể khử trùng bằng cách cắm trực tiếp vào ổ cắm.
- Nó có tác dụng chống lại tất cả các loại vi khuẩn và virus, kể cả các bệnh huyết thanh học (viêm gan A - B- C- HIV 9), đặc biệt là Covid. Nó cung cấp khử trùng hoàn toàn và an toàn.
- Công thái học; Nó nhỏ, có còi điện tử, di động, có thể được đặt bên cạnh bộ xử lý ở mỗi phòng trong suốt quá trình và mang lại sự sử dụng thuận tiện hơn.
- Cách sử dụng: Sau khi làm sạch (bằng cách loại bỏ máu, v.v.) và lau khô, bạn chỉ cần đặt vào bên trong và nhấn nút khởi động, trên đó có biển báo và hướng dẫn bằng giọng nói.

KÍCH THƯỚC: 30X20X8 CM 350 GR





SIZE ;
 29 x 20 x 4 cm
 21 x 16 x 4 cm
 20 x 10 x 4 cm
 19 x 8 x 4 cm

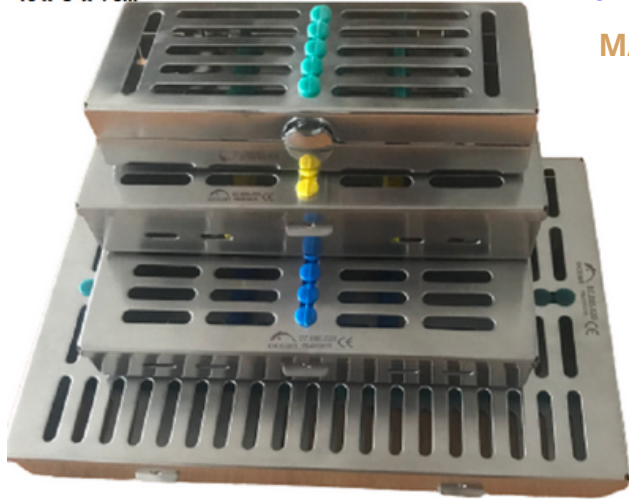


CASSETTE Tiệt trùng KÍCH THƯỚC LỚN

LỚN : SKST-01 TRUNG BÌNH : SKST-02 NHỎ : SKST -3

MÃ SỐ: SKST-01+02+03

- CASSETTE Tiệt Trùng Y Tế
- CẬU BÉ LỚN
- NÓ CÓ GIƯỜNG SILICON ĐẶC BIỆT
- NÓ ĐƯỢC SẢN XUẤT ĐẶC BIỆT CHO Cây ghép tóc và phẫu thuật thẩm mỹ.

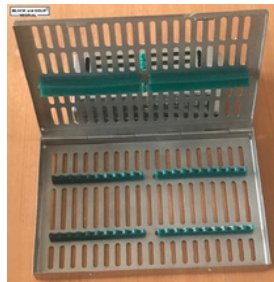



Cassette khử trùng

MÃ SỐ: SKST-05

- Kích thước: 16X7X2 Cm
- Phẫu thuật cây tóc
- Phẫu thuật thẩm mỹ

Nó được sử dụng trong các lĩnh vực.

Cassette tiệt trùng là dòng sản phẩm đặc biệt.

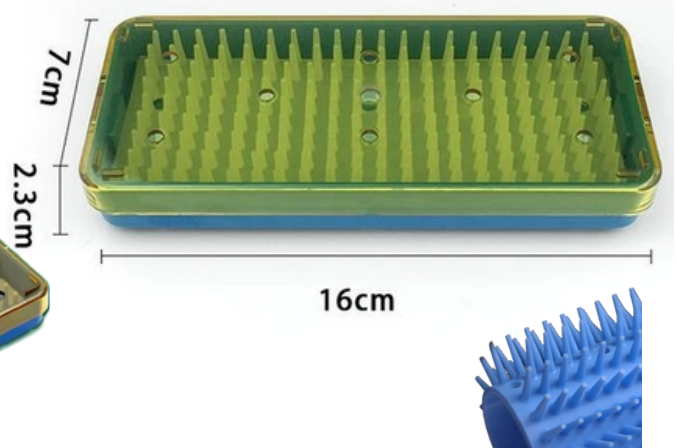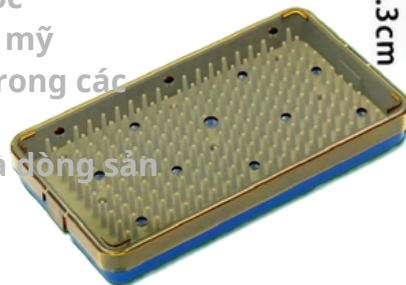

Cassette khử trùng

MÃ SỐ: SKST-05

- Kích thước: 24X15X7 Cm
- Phẫu thuật cây tóc
- Phẫu thuật thẩm mỹ

Nó được sử dụng trong các lĩnh vực.

Cassette tiệt trùng là dòng sản phẩm đặc biệt.






THIẾT BỊ PHÒNG VỆ SINH Y TẾ UVC 36 Mét Vuông HIỆU QUẢ

MÃ SỐ: T.UVC-36

Thiết bị phòng vô trùng Đèn UV C y tế có hiệu quả trong 36 mét vuông.

- Tuân thủ quy định được chứng nhận y tế.
- Nó là một sản phẩm sẵn sàng để sử dụng với thiết kế nhỏ gọn và phong cách.
- Nó có thể được gắn ở bất cứ đâu ( IHM INTERNATIONAL HAIR MEDICAL) các thiết bị đi kèm trong hộp.

THƯỚC THÉP Y TẾ 30 CM

KOD: T.Ç.C-30

- Thước đo và đánh dấu thép y tế
- Đó là thép y tế
- Nó dài 30 cm
- Các góc và cạnh có hình bán nguyệt, cắt mịn và không bị trầy xước.
- Có thể được khử trùng
- Nó là thép không gỉ.



LƯỢC THÉP Y TẾ Tiết Trùng

MÃ SỐ: T.T- 01



- Lược y tế bằng thép
- Lược kim loại là loại có thể hấp và khử trùng.
- Nó cung cấp nhiều năm sử dụng với cấu trúc kim loại của nó.
- Ngăn ngừa ô nhiễm



NHẪN BỘ SƯU TẬP GHÉP

KOD: GRFT.Y-01

- Vòng ghép thép y tế
- 100% thép y tế
- Kích thước nhẫn ngón tay có thể điều chỉnh
- Vấn đề lớn nhất trong việc thu thập và cấy ghép
Được thiết kế để trở thành trợ lý của bạn



THÌA THU GHÉP

MÃ SỐ: GRFT.K-01

- Thìa ghép thép y tế
- 100% thép y tế
- Kích thước nhẫn ngón tay có thể điều chỉnh
- Vấn đề lớn nhất trong việc thu thập và cấy ghép
Được thiết kế để trở thành trợ lý của bạn



CHAI PHUN KIM LOẠI Y TẾ

MÃ: MSSS-300

- Chai xịt kim loại 300 ml
- Đó là thân kim loại
- Có thể tiệt trùng - có thể hấp tiệt trùng
- Đây là mô hình y tế tuân thủ các quy định.



MÁY Cạo râu dùng pin có thể khử trùng có thể giặt được y tế



KOD: TM.B-01

- MẪU Y TẾ + CÓ THỂ GIẶT HOÀN TOÀN
- CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC
- NÓ LÀ PIN
- TẤT CẢ KÍCH THƯỚC VÀ SỐ CẮT CÓ SẴN
- CÔNG TRÌNH TỐI THIỂU 120 PHÚT

TẤM SILICON Y TẾ CHUẨN BỊ GHÉP

MÃ: GRFT.P-30

- Bộ chuẩn bị ghép silicone
- Có thể được khử trùng
- Đây là sản phẩm mà bạn có thể tách, đếm và phân chia các cành ghép.



BLACK and GOLD MEDICAL



0,01 mm
mm ve inch



150 mm

CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

MÃ: DJTL.KPS-01

- Thước đo kỹ thuật số
- Nó là một dụng cụ đo kỹ thuật số chạy bằng pin được sử dụng trong cấy ghép tóc và đo lường đối xứng hoặc làm đầy botox.

SAC EKİM ÖNCESİ PLANLAMA ÇİZİM CETVELİ
ELEKTRONİK DİJİTAL ÖLÇÜM



BỘ HỖ TRỢ KHẨN CẤP

KOD: ERP.ES514-B

- Bộ đèn soi thanh quản
- Bộ phẫu thuật: Kẹp-Lực-Tay cầm dao mổ-Kéo Bờ Đào Nha
- Bộ PVC phục hồi
- cửa quay tự động
- ống đặt nội khí quản
- Khí đạo
- Bình oxy và áp kế 1 lít
- Kích thước : 33 x 45 x 15 cm
- Trọng lượng: 3Kg

TẤM SILICON Y TẾ CHUẨN BỊ GHÉP

KOD: ERP.S514-E

- thân nhôm
- Các ngăn bên trong
- Sàn lót xốp
- Hệ thống khóa
- Kích thước :33 x 45 x 15 cm
- Trọng lượng: 2Kg
- Tài liệu quan trọng - Công cụ - Tài liệu của bạn

Túi an toàn và bảo vệ cho



DỤNG CỤ CẤY TÓC - TÚI BẢO VỆ PENSET

MÃ: PC-6

- NÓ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LƯU TRỮ VÀ MANG THEO KẸP Cây ghép TÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ NHẠY CẢM TƯƠNG TỰ.
- NÓ CÓ 6 MẮT
- NHUNG MỊN BÊN TRONG
- ĐÓ LÀ DA NỮ
- HỆ THỐNG KHÓA DÂY KÉO



MÔ HÌNH THEO DÕI BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CẮT TÓC MẪU DI ĐỘNG



Mã số : HST.MNTR-PO1
Đặc trưng:

- SPO2, PR, NIBP, Đo nhiệt độ cơ thể: Máy theo dõi này có khả năng đo SPO2 (độ bão hòa oxy), nhịp tim (PR), huyết áp (NIBP) và nhiệt độ cơ thể (oC), cung cấp khả năng theo dõi bệnh nhân toàn diện.
- Đo chính xác ở mức tước máu thấp: Nó có thể thực hiện các phép đo chính xác ngay cả ở mức tước máu thấp 0,05%, mang lại kết quả đáng tin cậy cho các tình huống quan trọng.
- Chỉ số tước máu: Đo chỉ số tước máu giúp bạn theo dõi tình trạng tước máu chi tiết hơn (Chỉ số tước máu dao động từ 0,05% đến 20%).
- Thích hợp cho những tình huống khắc nghiệt: Nó có thể thực hiện các phép đo chính xác ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt như bệnh nhân sơ sinh và sốc, mang lại khả năng sử dụng linh hoạt.
- Hai chế độ đo khác nhau: Bạn có thể chọn giữa chế độ Tự phát (tức thời) và Giám sát.
- Lưu trữ dữ liệu: Với tính năng lưu trữ dữ liệu, bạn có thể truy cập dữ liệu lịch sử và theo dõi xu hướng biểu đồ. Bạn có thể nhận được 48 giờ dữ liệu không bị gián đoạn ở chế độ giám sát.

SPO 2 PROBU DIGITAL

MÃ SỐ: STRP-01

- Thiết bị đo oxy loại ngón tay Pulse Oximeter từ ngón tay
- Máy đo oxy ngón tay kỹ thuật số **KẾT QUẢ CHÍNH XÁC 100%** Máy đo oxy xung là thiết bị có thể đo nhịp đập mỗi phút và mức oxy trong máu một cách dễ dàng và nhanh nhất, đồng thời cũng ghi lại nó.





GỐI CỔ BƠM HƠI

MÃ: BYŞ.10

- GỐI CỔ BƠM HƠI
- LỰA CHỌN MÀU SẮC CÓ SẴN
- MẶT BÊN NGOÀI NHƯNG MANG LẠI SỰ THOẢI MÁI
- ĐÂY LÀ LOẠI GỐI THOẢI MÁI MÀ BỆNH NHÂN NÊN SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN SAU KHI CẤY TÓC.

BĂNG TRẮNG CẤY TÓC

KOD: SEB.50

- BỆNH SAU KHI CẤY TÓC
- NÓ LÀ BĂNG DÙNG ĐỂ NGĂN NGỪA LÃO HÓA.
- CẤU TRÚC ĐÀN HỒI ĐẶC BIỆT KHÔNG BÉO - KHÔNG MANG LẠI CẢM GIÁC KHÓ CHỊU
- NÓ LÀ BĂNG RỘNG
- CÓ THỂ GIẶT



CLIP CẤY TÓC DÀI

MÃ: BỘ.50

- KIM LOẠI CÓ THỂ ĐƯỢC KHỬ TRÙNG
- NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TẠO RA KHU VỰC LÀM VIỆC THOẢI MÁI VÀ THOẢI MÁI HƠN BẰNG CÁCH THU THẬP TÓC TRONG QUY TRÌNH CẤY GHÉP TÓC DÀI.



50 miếng



C ĐÀU SILICON

MÃ SỐ: C.SB.01



- Nó được sử dụng trong tất cả các hoạt động cần hỗ trợ đầu.
- Phẫu thuật cấy tóc (ENT, Phẫu thuật thẩm mỹ, Phẫu thuật tổng quát)
- Đó là: 22 X 8,5 X 4,5 cm.
- Nó được làm bằng polymer nhớt.
- Nó có thể được tái sử dụng và dễ dàng làm sạch.
- Nó không thấm nước và chống tĩnh điện.
- Nó cho phép người bệnh nằm ở tư thế nằm lâu trong nhiều giờ mà không bị xáo trộn hay để lại dấu vết trong quá trình phẫu thuật cấy tóc.

PURON POZİSYON EPEDİ

MÃ SỐ: C.SB.02

- Nó cung cấp lượng không khí vào ở tư thế nằm sấp của bệnh nhân.
- Kích thước: 28 * 24 * 14 cm
- Nó được làm bằng polymer nhớt.
- Nó có thể được tái sử dụng và dễ dàng làm sạch.
- Nó không thấm nước và chống tĩnh điện.

Ở vị trí puron trong phẫu thuật cấy tóc; Nó cho phép bạn ở lại thoải mái trong thời gian dài.

Nó hoàn toàn chỉnh hình và không để lại sẹo.



ĐỆM HỖ TRỢ CỔ SILICON ĐẶC BIỆT

MÃ SỐ: C.SB.03



- Nó nhằm mục đích giảm bớt áp lực, bảo vệ và hỗ trợ trong quá trình chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật.
- Nó có kích thước 19 X 11 X 8 cm.
- Nó được làm bằng polymer nhớt.
- Nó có thể được tái sử dụng và dễ dàng làm sạch.
- Nó không thấm nước và chống tĩnh điện.
- Nó được sử dụng để hỗ trợ cổ trong phẫu thuật cấy tóc.
- Bệnh nhân không cảm thấy khó chịu khi thực hiện thủ thuật kéo dài, cổ không bị đau và giúp bệnh nhân có thể thoải mái bất động trong nhiều giờ.



BÚT VẼ VÀ ĐÁNH DẤU DA VÔ TRÙNG

MÃ SCK-10

- MÀU SẮC: VẼ MÀU XANH ĐẬM
- NÓ ĐƯỢC ĐÓNG GÓI VÔ TRÙNG
- 1 BÚT VẼ Y TẾ
- CÓ 1 QUYỀN ĐẶC BIỆT.
- SAU KHI MỞ NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO ĐẾN KHI LƯU TRỮ HOÀN THÀNH.
- NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VẼ + ĐÁNH DẤU VÀ VIẾT TRONG THỦ TỤC Cấy ghép TÓC.
- NÓ CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ BÚT ĐÁNH DẤU TRONG VẼ PHẪU THUẬT NHỰA, Phẫu Thuật Tổng Quát VÀ Da Liễu, VÀ CŨNG TRONG CÁC THỦ TỤC HÌNH XĂM.



BÚT VẼ VÀ ĐÁNH DẤU DA VÔ TRÙNG

MÃ SỐ: CK-B.10

- MÀU SẮC: VẼ TRẮNG
- 1 BÚT VẼ Y TẾ
- CÓ 1 QUYỀN ĐẶC BIỆT.
- SAU KHI MỞ NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO ĐẾN KHI LƯU TRỮ HOÀN THÀNH.
- NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VẼ + ĐÁNH DẤU VÀ VIẾT TRONG THỦ TỤC Cấy ghép TÓC.
- NÓ CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ BÚT ĐÁNH DẤU TRONG VẼ PHẪU THUẬT NHỰA, Phẫu Thuật Tổng Quát VÀ Da Liễu, VÀ CŨNG TRONG CÁC THỦ TỤC HÌNH XĂM.



BÚT VẼ VÀ ĐÁNH DẤU DA VÔ TRÙNG

MÃ SỐ: CK-S.10

- MÀU SẮC: VẼ ĐEN
- 1 BÚT VẼ Y TẾ
- CÓ 1 QUYỀN ĐẶC BIỆT.
- SAU KHI MỞ NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO ĐẾN KHI LƯU TRỮ HOÀN THÀNH.
- NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VẼ + ĐÁNH DẤU VÀ VIẾT TRONG THỦ TỤC Cấy ghép TÓC.
- NÓ CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ BÚT ĐÁNH DẤU TRONG VẼ PHẪU THUẬT NHỰA, Phẫu Thuật Tổng Quát VÀ Da Liễu, VÀ CŨNG TRONG CÁC THỦ TỤC HÌNH XĂM.





BATIK TIRNAK ROBOTU


MÃ SỐ: BTR-05

Cách sử dụng:

- Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy ngâm chân trong nước nóng trong 15 phút.
- Gắn từng cánh tay của dụng cụ vào các cạnh của móng mọc ngược,
- Cố định phần đỡ ở giữa của dụng cụ lên móng tay bằng một tay và vận vít của phần đỡ cho đến khi có cảm giác giãn nở (quá trình này sẽ được thực hiện trong nước nóng). Lặp lại quá trình vận và mở rộng vít 3 lần với khoảng thời gian 10 phút trong nửa giờ, sau đó nhấc chân ra khỏi nước nóng và làm khô móng bằng máy sấy tóc.
- Tháo dụng cụ và đỡ các bộ phận đã sửa bằng cách đặt bông bên dưới chúng.

Đặc trưng :

Nó là thép không gỉ. + Không bị cong, xoắn.
Chiều rộng 2,5cm / chiều dài 4cm

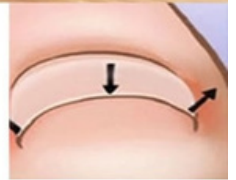

13 X 9 X 3,5 CM

PIN ĐÁ 13 CM


KOD: BZAK-13

- MÀU SẮC: XANH
- PIN ĐÁ (NÓ ĐƯỢC CHỨA DẠNG CHẤT LỎNG.
- ĐO LƯỜNG 13X9X3.5 CM
- 110 gam

PIN ĐÁ 32 CM

KOD: BZAK-32

- MÀU SẮC: XANH
- PIN ĐÁ (NÓ ĐƯỢC CHỨA DẠNG CHẤT LỎNG.
- ĐO LƯỜNG NÓ 32 X 30 X 1.4
- 1200 gam

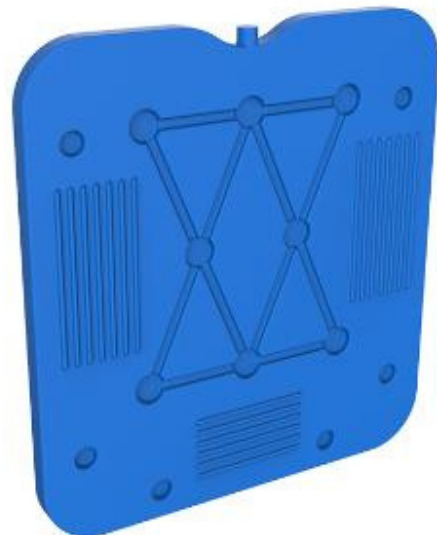



PHUN BÔI TRƠN BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ

MÃ SỐ: MB-S.500

Cách sử dụng:

- ĐẦU PHUN ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KÈM,
- TỪ CUỐI ĐỘNG CƠ HOẶC ĐẦU KHỞI ĐỘNG;
- 3 PHÍCH CẮM ĐƯỢC CHẮC CHẮN. ĐỘNG CƠ ĐƯỢC CHẠY Ở chế độ không tải trong 30 GIÂY. ĐÓ LÀ TẤT CẢ.
- NGĂN NGỪA ĐỘNG CƠ Sưởi ấm
- CẮT ÂM THANH TỪ ĐỘNG CƠ
- HỖ TRỢ LÀM VIỆC KHỎE MẠNH MÀ KHÔNG CẦN ĐI BỘ
- 500ML



HC HairCharm


•Sodium	3-5mEq
•Potassium	3-5mEq
•Magnesium	0,3-0,5mEq
•Calcium	2-4mEq
•Phosphorous	1-2mEq
•Zinc (Çinko)	150-200mg
•Copper	10-20mg
•Iron	1mg
•Vitamin A	233units
•Vitamin C	6mg
•Vitamin D	66units
•Vitamin E	0,66units
•Vitamin B (Thiamine)	0,055mg
•Vitamin B2 (Riboflavine)	0,07mg
•Vitamin B3 (Niacine)	0,9mg
•Vitamin B5 (Pantothenic)	0,3mg
•Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,05mg
•Biotine (Vitamin B7)	30mg
•Folic Acid (Vitamin B9)	8mg
•Vitamin B12 (Cyanocobalamine)	0,04mg

Saçınız için Gerekli Tüm Vitamin ve Mineralleri İçerir

TRỊ LIỆU TÓC

MÃ SỐ: HC.HCRM-6X5

- TÓC TRỊ LIỆU Xâm lấn
- MULTIVITAMIN SERUM PHỨC HỢP

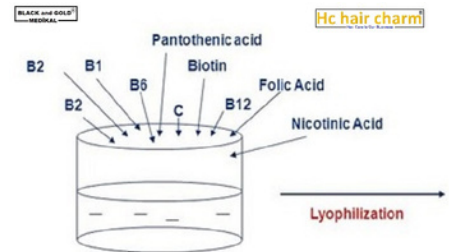

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA CHÚNG TÔI

Y tế tóc quốc tế

Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để trở thành Đại lý phân phối thì sẽ được cấp đại lý sang các nước khác.

Liên hệ để biết
chi tiết!

E-MAIL

info@internationalhairmedical.com

ĐIỆN THOẠI

+90 539 662 8924 / +90 533 894 8843



Thương mại y tế tóc quốc tế. Ltd. Şti.

TỪ : 2020

*NÓ LÀ THIẾT BỊ CẤY TÓC VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ,
TRUNG TÂM BÁN SỈ, BÁN LẺ*

CƠ QUAN BÁN HÀNG QUỐC TẾ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển tích cực đến 61 quốc gia trên thế giới, ngoại trừ các quốc gia nơi chúng tôi có Đại lý phân phối.

Lô hàng của chúng tôi được giao trực tiếp đến địa chỉ.

Mặc dù thay đổi tùy theo quốc gia, nhưng việc giao hàng bằng đường hàng không của chúng tôi sẽ được chuyển đến địa chỉ trong vòng 1-4 ngày, việc giao hàng bằng đường bộ của chúng tôi sẽ được chuyển đến địa chỉ trong vòng 7-14 ngày, việc giao hàng bằng đường biển + đường bộ của chúng tôi sẽ được chuyển đến địa chỉ trong vòng 14-28 ngày.

Chúng tôi cũng mang đến sự tiện lợi lớn cho người dùng với nhiều phương thức thanh toán chính thức như Thẻ tín dụng, Thanh toán bằng thẻ ghi nợ + Thanh toán qua Liên kết + Chuyển khoản ngân hàng.

Ngoại trừ các quốc gia nơi chúng tôi có nhà phân phối, việc bán hàng nhanh chóng cũng được thực hiện thông qua Trang web Trực tuyến của chúng tôi.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có hóa đơn và bảo hành quốc tế.